

婦人科用剥離子 70955000 一般医療機器

サイトブラシ[®]プラス

CYTOBRUSH

再使用禁止

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）


妊娠10週以上経過している妊婦には使用しないこと。

[安全性が確立されていない]

子宮内膜の細胞採取には使用しないこと。

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

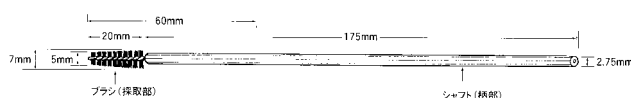

サイトブラシプラスは、直径0.4mmのステンレス製ワイヤー、外径2.75mm、長さ175mmのABS樹脂製シャフト（柄部）ならびに長さ20mm、幅5～7mmのナイロン製ブラシ（採取部）からなる。


【使用目的、効能又は効果】

細胞学的診断に供する粘膜細胞組織を子宮から採取するために用いる器具。

本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 子宮頸管内からの細胞採取は、本品を優しく子宮頸管内に挿入し、半回転から一回転、ゆっくりと回転させる。

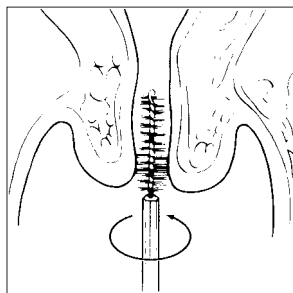

2. 塗末は決められた場所の上にサイトブラシを転がし回転させ、直ちに細胞診用スプレーか固定液で固定する。
又は95%エタノールで処置すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 子宮頸管内の奥まで挿入しないこと。
- 2) ブラシの毛が子宮頸管の下部分に常に見えていること。
- 3) まれに少し出血する場合がある。
- 4) 婦人科検査の終了前に止血を確認すること。
- 5) 教育訓練を受けた医療従事者以外は使用しないこと。
- 6) 使用期限を確認すること。
- 7) 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 8) 包装を開封したら直ちに使用すること。
- 9) 強くこすらないで使用する。

2. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊娠10週以上経過している妊婦には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

2. 使用期限

箱に記載された使用期限を参照（自己認証による）

3. 注意事項

ブラシが入っている滅菌袋（内袋）には「使用上の注意」「連絡先」等が記載されていないので内袋のみ保管せず外箱又は添付文書と一緒に保管すること。

**【包 装】

サイトブラシプラス : 1本×40、10本×10

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

* 製造販売元: **あすか製薬株式会社**
東京都港区芝浦二丁目5番1号
TEL 03-5484-8361

製 造 元: **クーパーサージカル（アメリカ合衆国）**
CooperSurgical, Inc.

* 提 携: **株式会社あすか製薬メディカル**
神奈川県川崎市高津区下作延5-36-1
問合せ先 **ヘルスケア事業部**
TEL 044-812-8650