

*婦人科用剥離子 70955000 一般医療機器

ウテロブラシ

UTEROBRUSH

再使用禁止

【禁忌・禁止】


適用対象(患者)

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には使用しないこと。

[安全性が確立されていない]

再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

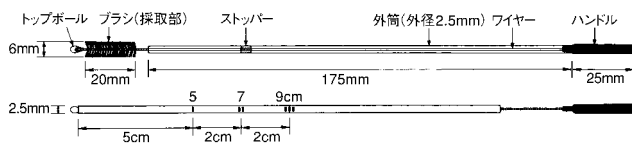

ヘッドカバー(保護キャップ)

ウテロブラシは外径2.5mm、長さ175mmの半透明のポリプロピレン製外筒と、直径0.4mmのステンレス製ワイヤーに長さ20mm、幅6mmのナイロン製ブラシ(採取部)ならびに長さ25mmのAstar製ハンドル(柄部)の補助部分からなる。外筒には、外筒の先端から5、7、9cmの位置に青色のガイドマークが付されている。

なお、採取部のワイヤー先端を硬化グルーボールで保護してある。

*【使用目的、効能又は効果】

細胞学的診断に供する粘膜細胞組織を子宮から採取するために用いる器具。



本品は単回使用である。

【操作方法又は使用方法等】


1. 本品を滅菌バッグから取り出し、保護キャップを外す。

次に外筒を持ち、ハンドルを手前にいっぱい引き、採取部を外筒内に装填する。


2. 外筒を持ち、採取部先端が軽く子宮底に触れるまで静かに挿入する。

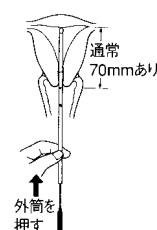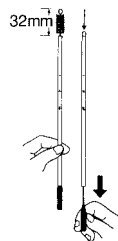


3. 外筒をハンドルの位置まで引いて固定し、採取部を開放する。

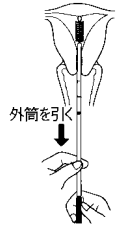


4. ハンドルを時計方向に一回転させ、さらに時計方向とは反対に一回転させて細胞を採取する。

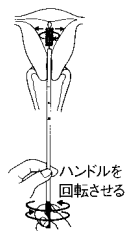

5. 外筒を押し戻し、採取部を再び外筒内に装填する。次にハンドルを引いて、子宮から本品を取り出す。

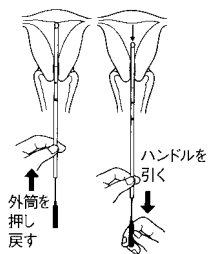

6. 採取部を外筒より押し出し、ブラシをプレパラート上にたたきつけて採取された内膜組織片を落とす。別のプレパラートを重ねて圧搾を加えながらすりあわせてスライドを作成し、一片ずつに離し直ちにエタノール固定する。

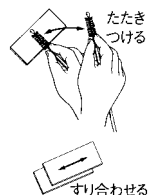

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 2) 本品はEOG滅菌済み製品のため、滅菌バッグはハンドル側から開封すること。
- 3) 包装を開封したら直ちに使用すること。
- 4) 本品使用前には、あらかじめ子宮腔部を消毒し、操作はすべて無菌的に行うこと。
- 5) 子宮頸管狭窄例には拡張後挿入すること。また、挿入不能例には無理に挿入しないこと。

2. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1.貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて室温で保管すること。

2.使用期限

箱に記載された使用期限を参照（自己認証による）

* 3.注意事項

ブラシが入ってる滅菌袋（内袋）には「使用上の注意」「連絡先」等が記載されていないので内袋のみ保管せず外箱又は添付文書と一緒に保管すること。

【包 装】

1本×10

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

** 製造販売元：**あすか製薬株式会社**
東京都港区芝浦二丁目5番1号
TEL 03-5484-8361

* 製 造 元：**クーパーサージカル（アメリカ合衆国）**
CooperSurgical,Inc.

** 提 携：**株式会社あすか製薬メディカル**
神奈川県川崎市高津区下作延5-36-1
問合せ先 ヘルスケア事業部
TEL 044-812-8650