

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針（JMDN コード：70459000）

テルモノンベル針


再使用禁止

*【禁忌・禁止】

*再使用禁止、再滅菌禁止

*【形状・構造及び原理等】

<構造図（代表図）>

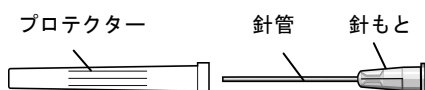

*血液・体液に接触する部分の原材料一覧

部品名	原材料
針管	ステンレス鋼
針もと	ポリプロピレン

<原理>

*本品は針管、針もと、プロテクターから構成され、ルーアーテーパーを有する針もとをシリンジ等と接続し、歯根管や術部等を洗浄するために使用する滅菌済み洗浄針である。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

歯根管や術部等を洗浄する際、注射器等に接続して使用する。

【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出し、シリンジ等と確実に接続する。
2. プロテクターをまっすぐ引いて外す。
3. 歯根管や術部等を洗浄する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) 本品をシリンジ等に接続する場合は、プロテクターを付けたまま接続すること。
- (2) 針管に直接手を触れないこと。〔感染の可能性がある。〕
- (3) あらかじめ接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- (2) 本品は刃面がないので、注射には使用しないこと。またゴム栓等には刺通しないこと。
- (3) 針管部に過剰な負荷をかけないこと。又はシリンジ等に装着する場合は、プロテクターで針もとに過剰な回転負荷をかけないこと。〔針管又は針もとが破損し、薬液等が漏れる可能性がある。〕
- (4) 強圧洗浄は避けること。〔組織が損傷する可能性がある。〕
- (5) 針管を針もとの付け根で折り曲げないこと。〔針管が折れる可能性がある。〕
- (6) 針管の反復折り曲げを行わないこと。〔針管が折れる可能性がある。〕

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

*電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

*外 国 製 造 所：テルモ フィリピンズ コーポレーション
Terumo (Philippines) Corporation

*国 名：フィリピン共和国