

機械器具 56 採血又は輸血用器具
一般医療機器 ルアーアダプタ（JMDNコード：35075000）

ベノジェクトⅡ分注ホルダー

再使用禁止


【禁忌・禁止】

<使用方法>

1. 再使用禁止、再滅菌禁止
2. 滅菌済み真空採血管以外の採血管を使用しないこと。
3. 患者ごとの使用とし、使用後は廃棄すること。[血液が付着した場合、交差感染のおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

<構造図（代表図）>

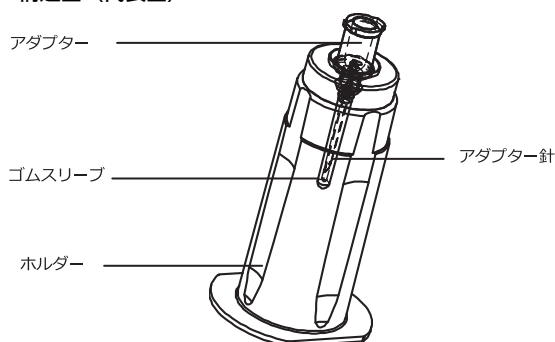

<原理>

本品は注射筒から血液を真空採血管へ分注する器具である。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は注射筒から血液を真空採血管へ分注する際に、固定及び安定化させる器具である。本品のアダプターに注射筒を嵌め込み、固定した後、ホルダーに真空採血管を挿入することによって、分注が開始される。

【使用方法等】

1. 開封前に、包装の外側からゴムスリーブやその他の部品に異常がないことを確認する。
2. 開封後、採血済みの注射筒を本品のアダプターに嵌め込み、固定する。
3. 真空採血管をホルダーにまっすぐ完全に押し込み、分注を行う。
4. 分注の血流が停止したら、直ちに採血管を本品から外す。
5. 連続分注する場合には、本品を固定したまま採血管を取り替える。
6. 分注終了後、注射筒と本品を接続したまま直ちに廃棄する。[使用後、注射筒と本品に血液が付着しているため、分別廃棄すると交差感染のおそれがある。]

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 真空採血管への連続分注は最大10本までとすること。[ゴムスリーブから血液漏れが起こるおそれがある。]
(JIS T 3220の6.5.7)
2. 本品への注射筒の固定は確実にすること。[使用中、特に連続分注の際に、注射筒が外れる可能性がある。]

3. あらかじめ、アダプターとホルダーの接合部に異常がないことを確認してから使用すること。[アダプター等が破損し、血液が漏れる可能性がある。]
4. 採血管内に血液が流入しない場合は、以下の操作を行うこと。[本品及び併用医療機器が破損する可能性がある。]
(1) アダプター針が採血管の栓を完全に貫通するよう、再度採血管を押し込む。
(2) (1)の操作を行っても血液が流れない場合には、採血管を抜去し、新しい採血管と交換する。
(3) それでも血流が流れない場合には、新しい本品で操作をやり直す。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 使用中は本品の破損、嵌合部の緩み及び血液漏れなどについて、定期的に確認すること。
2. 採血管を本品へ押し込む際、注射筒の押し子を操作しないこと。[注射筒との接続部位から血液が漏れる可能性がある。]
3. アダプターに過剰な負荷をかけないこと。[アダプター等が破損し、血液が漏れる可能性がある。]
4. ホルダー内に指を入れないこと。[針刺し、感染の可能性がある。]
5. 本品内に血液漏れが生じた場合は、注射筒を直ちに本品から抜去し、新しい本品と交換すること。[ゴム栓タイプの採血管を多数使用した場合、アダプター針のゴムスリーブが正常に戻らず、血液が漏れる可能性がある。]
6. 採血管を立てた状態で本品へ挿入すること。[横にした状態で使用すると、一旦採血管内に分注された血液が注射筒に逆流するおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

外国製造業者：泰尔茂医療産品（杭州）有限公司

Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd.

国名：中華人民共和国

