

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 保護栓（JMDN：70280000）

スワブキャップTM

再使用禁止

【警告】

火気厳禁[引火性液体を含有しているため。]


【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止、再滅菌禁止
- (2) 閉鎖式コネクタのメスルアー部のみに使用すること。[開放式コネクタに使用すると製品中のアルコールが輸液ライン中に混入する可能性があるため。]


【形状・構造及び原理等】

＜構造図（代表図）＞

製品外観/断面

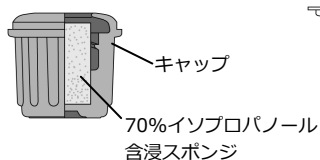

個包装外観

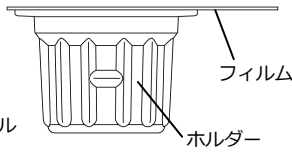

＜原理＞

本品は、ポリオレフィン製のキャップの中に 70%イソプロパノールを含浸したセルロース製スポンジが挿入されており、輸液セット等のオスコネクタと直接接続可能な閉鎖式コネクタに接続し、このコネクタ天面の清潔維持・保護に用いる。

【使用目的又は効果】


＜使用目的＞

本品は、閉鎖式コネクタに接続して、汚染防止・保護に用いるキャップである。


【使用方法等】

取り付け方法

1. フィルムを剥がして開封する。
2. 閉鎖式コネクタを片手で保持し、もう一方の手でホルダーごと本品を閉鎖式コネクタに押し込み、時計回りに回して接続する。

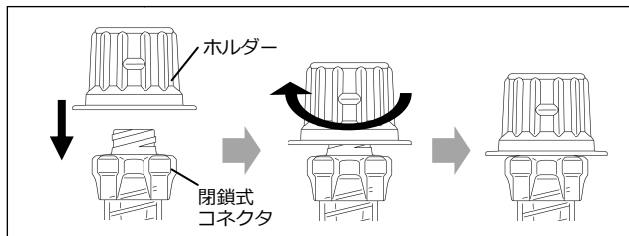

3. ホルダーをまっすぐ引き抜いて取り外し、本品が奥まで接続されていることを確認する。

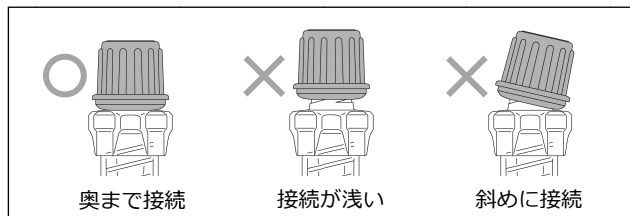

取り外し方法

閉鎖式コネクタを片手で保持しながら、もう一方の手で本品を反時計回りに回して取り外す。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- (1) 個包装が破損している場合は本品を使用しないこと。
- (2) 個包装を開封後、すぐに使用すること。
- (3) 個包装を開封後に本品が落下等で汚染した場合は、使用しないこと。
- (4) 閉鎖式コネクタに異物や薬液が付着している場合は、清拭してから本品を接続すること。
- (5) 本品の取り付け後及び取り外し後、閉鎖式コネクタのオス側の接続が緩んでいないか確認すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) 本品はアルコールを含むため、併用医療機器の添付文書を確認した上で使用すること。
- (2) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- (3) 本品を閉鎖式コネクタに接続する際に 70%イソプロパノールが噴出する可能性があるため、目に入らないよう注意すること。
- (4) 本品の使用に伴って、本品のキャップが色落ちする場合があるが、本品の性能、安全性には問題ない。
- (5) 患者が本品を誤飲しないよう、取り扱いに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

＜有効期間＞

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

外国製造所：アイシーユーメディカル ICU Medical, Inc.

国 名：米国

TERUMO