

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 麻酔用注射筒 (JMDNコード：35387001)
(汎用注射筒 (JMDNコード：13929001))


テルモシリンジPG6

再使用禁止


【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
再使用禁止、再滅菌禁止

*【形状・構造及び原理等】

＜構造図（代表図）＞

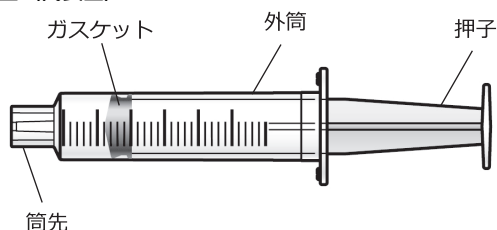

〔筒先形状〕

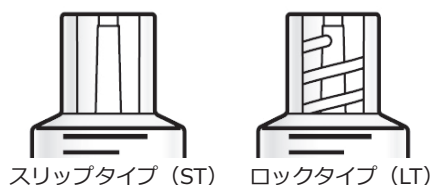

血液・体液に接触する部分の原材料一覧

部品名	原材料
ガスケット	エラストマー
外筒	ポリプロピレン
潤滑剤	シリコーン油

＜原理＞

* 本品は、主として神経麻酔（皮下用の注射針等を使用する一部の神経麻酔を除く。）の麻酔薬、又は薬液等の投与に使用する器具である。本品の筒先形状はISO 80369-6に適合し、筒先形状以外はJIS T 3210滅菌済み注射筒に適合するものである。

*【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

* 本品は、主として神経麻酔（皮下用の注射針等を使用する一部の神経麻酔を除く。）の麻酔薬、又は薬液等の投与に使用する器具である。

*【使用方法等】

1. 本品を包装から取り出す。

* 2. ISO 80369-6に適合する採液針等を取り付け、麻酔薬、又は薬液等（以下、薬液とする。）を吸引する。

* 3. ISO 80369-6に適合する穿刺針又はカテーテル等に接続して、薬液を投与する。

* 4. ISO 80369-6に適合する穿刺針、カテーテル等を抜去後、必要な場合は止血する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. あらかじめ他の医療機器等との接続部に緩みがないことを確認してから使用すること。

* 2. シリンジポンプを使用する場合は、以下の事項を順守すること。
(1) シリンジポンプのメーカーに適用の可否を確認すること。

(2) シリンジポンプの電子添文及び取扱説明書を確認後、使用すること。

(3) 投与開始時には、投与状態（シリンジの動作状態、薬液の減り具合）や投与部位、及びメスコネクタとの接続部位を必ず確認すること。また、投与中にも、巡回時等定期的に同様の確認をすること。

(4) 微量投与で使用する場合は、投与ラインの閉塞の発生がないこと等、投与状態に特に注意すること。〔設定流量が低くなるにつれ、閉塞発生から検出までの時間が長くなるため、長時間注入が中断する場合がある。麻酔薬、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。〕

(5) 薬液は室温になじませてから使用すること。〔冷えたまま使用するとシリンジの押子の摺動抵抗が増加し、閉塞警報が多発する原因となる。〕

3. 本品に衝撃を与えないこと。〔破損する可能性がある。〕

* 4. 他の医療機器と接続する場合は、以下の事項を順守すること。

(1) 接続する際は、過度な締め付けをしないこと。〔筒先に破損、空回りが生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。〕

(2) 接続部分に薬液を付着させないこと。〔接続部の緩み、空回り等が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。〕

(3) メスコネクタと接続する際は、横方向の力を加えないこと。〔筒先に曲がりや破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。〕

*【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

* 1. 使用中は本品の破損や接続部の緩み、薬液の漏れ等について、定期的に確認すること。

* 2. 薬液の種類によっては、本品の外筒の内側に塗布されているシリコーン油が析出することがあるので注意すること。シリコーン油が析出した場合は、薬液の電子添文を確認し、適切な処置をとること。

* 3. ガスケット部に針等で傷をつけないこと。〔破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。〕

4. 外筒印刷部の目盛を越えて押子を引かないこと。〔押子が外筒から抜けて液漏れが生じる可能性がある。〕

5. 押子はまっすぐに引くこと。〔斜めに引くと、ガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れ、空気の混入又はガスケットが外れる可能性がある。〕

6. 本品を鉗子等でつまんで傷をつけないこと。〔破損が生じ、液漏れ、空気の混入を引き起こす可能性がある。〕

7. 外筒部を強く握るなど、圧迫するような力を加えないこと。〔圧迫すると、ガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れ、空気の混入が生じる可能性がある。〕

8. 外筒印刷部の目盛をこすらないこと。〔目盛が消える可能性がある。〕

* 9. 外筒印刷部に薬液がついた状態で放置しないこと。〔印刷が剥離する可能性がある。〕

* 10. 針等を接続し使用する場合は、針刺しに注意し慎重に取り扱うこと。

11. 押子を繰り返し前後させるなどの操作を行う際は、押子を汚染さ

- せないよう、清潔な手袋を着用するなど、十分注意して操作すること。〔押子を経由して外筒内が細菌汚染する可能性がある。〕
- * 12. 冷えた薬液を吸引し使用する場合は、取り扱いに注意すること。〔低温下では耐衝撃強度が低下し、破損する可能性がある。〕
- * 13. 薬液を投与する際は、ゆっくりと投与すること。〔急激に負荷をかけると外筒が破損する可能性がある。〕

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電 話 番 号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

