

機械器具 74 医薬品注入器
高度管理医療機器 注射筒輸液ポンプ（JMDNコード：13217000）

「テルフュージョンシリンジポンプSS型10」の付属品

（テルフュージョン薬剤ライブラリマネージャー）

【禁忌・禁止】


＜使用方法＞

本品の改造をしないこと。[異常動作を引き起こす可能性がある。]

【形状・構造及び原理等】

＜構造図（代表図）＞

テルフュージョン薬剤ライブラリマネージャー（USBメモリ）
（TE-SW8X0B）

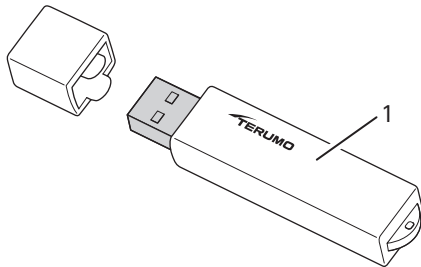

No.	名称	機能
1	テルフュージョン薬剤ライブラリマネージャー（USBメモリ）	USBメモリを介して、汎用コンピュータにテルフュージョン薬剤ライブラリマネージャー（以下、薬剤ライブラリマネージャー）を構築する。

＜原理＞

本品は汎用コンピュータにインストールされ、ポンプ本体と通信接続することで、ポンプ本体の薬剤名、投与法等の投与関連情報（以下「薬剤ライブラリ」とする）を登録する。

**【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、汎用コンピュータにインストールし、次のような目的から用いるアプリケーション。

- ポンプ本体の設定確認、変更
- 薬剤名、投与法等の投与関連情報のポンプ本体への書き込み、ポンプ本体からの薬剤ライブラリの読み出し
- 薬剤ライブラリの編集

** なお、テルフュージョンシリンジポンプSS型10は、シリンジ内の医薬品及び溶液等を設定した時間当たりの流量で持続的に注入する装置である。

**【使用方法等】

- 本品を起動する。
- ポンプ本体の通信設定を含む設定を変更する場合、使用環境に応じた通信設定を含むポンプ設定を編集し、ポンプ本体と汎用コンピュータを通信接続し、ポンプ設定情報を送信する。
- 作成した薬剤ライブラリをポンプに送信することで、新しい薬剤ライブラリをポンプに設定することができる。また、既にポンプに設定された薬剤ライブラリを受信して、現在の薬剤ライブラリを確認できる。

【適用機種】

テルフュージョンシリンジポンプSS型10（コード番号：TE-SS8X0R）以外に、以下の機種に適用可能である。

・テルフュージョンシリンジポンプSS型10PCA
（コード番号：TE-SS8X0P）

（医療機器承認番号：30500BZX00267000）

* ・テルフュージョンシリンジポンプSS型10TCI
（コード番号：TE-SS8X0T）

（医療機器承認番号：30600BZX00107000）

** ・テルフュージョン輸液ポンプLM型10

（コード番号：TE-LM8X0A）

（医療機器承認番号：30600BZX00270000）

** ・テルフュージョン通信ボックス

（コード番号：TE-RS8X0N）

（医療機器承認番号：30600BZX00270000）

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ユーザー情報は不正使用を防止するため、厳重に管理すること。
- 患者の個人情報を本品に入力しないこと。[不正アクセス等により、個人情報漏洩の可能性がある。]
- 本品の使用によって作成したファイルを削除する場合は、個別にファイルを削除すること。[アンインストールでは使用者によって作成されたファイルを削除できない。]
- 薬剤ライブラリを編集した後は、設定を再確認すること。[本品は薬剤ライブラリの設定値が正しいかを判断できない。]
- 薬剤ライブラリを作成／編集する場合は、薬剤や投与法等を考慮し、投与量を設定すること。[本品は薬剤ライブラリの設定値が正しいかを判断できない。]
- 本品をインストールした汎用コンピュータは、院内等の安全なネットワーク環境下で使用し、インターネットに接続しないこと。[セキュリティ対策を提供していないため、コンピュータウイルス等により、本品が正常に動作しない可能性がある。]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 詳細は取扱説明書を参照すること。
- 本品は、ローカルドライブにインストールすること。[本品が正常に動作しない可能性がある。]
- 接続する各機器の設置は各機器の電子添文や取扱説明書を確認後、適切に設置・接続して使用すること。[指定外の設置・接続を行うと、本品又は周囲の機器の誤作動や感電の可能性がある。]
- OSのセキュリティ対応更新プログラムをアップデートする場合は、弊社担当者まで連絡すること。

＜相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）＞

【その他の注意】

- 他のソフトウェアを使用する場合は、本品への影響を考慮すること。[本品が有する機能や性能が得られない可能性がある。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター

取扱説明書を必ずご参照ください。

