

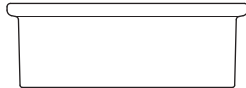
ケモセーフファイン

（インジェクター用キャップ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】**<使用方法>**

再使用禁止、再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】**<構造図>****<原理>**

本システム品は、注射針を使用せずに、シリンジ、輸液セット、輸液剤容器、薬剤バイアル等に接続し、薬剤、主として抗がん剤等を、閉鎖的に容器から他の薬液容器に移すための閉鎖式薬剤移注システムである。

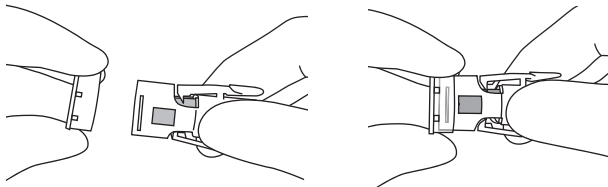
本システムの構成品同士を押し込んで接続することにより、薬剤の飛散ならびに曝露のリスクを最小限に抑えるためにシステム外への薬剤飛散・漏出を防止し、閉鎖的な医薬品等の投与にも使用できるものである。また、外部の汚染物質がシステム内に混入することを防ぐと同時に、ハザーダスドラッグ又はその揮発成分がシステム外へ漏出することを防ぐことを意図して設計された構造を有する。

【使用目的又は効果】**<使用目的>**

抗がん剤等を容器から他の薬液容器に移す際に、容器に接続して環境中への薬剤の飛散・漏出を防止するために用いる閉鎖型の薬物移送システム（CSTD：Closed-System Drug Transfer Device）であり、容器内外の差圧を調整する機構を有する。外部の微生物等の本システムへの混入を防止すると同時に、液状又は気化・エアロゾル化した薬剤の本システムからの飛散・漏出を防止する。

【使用方法等】

1. 汚染に十分注意し、本品を包装から取り出す。
2. 本品をケモセーフファイン（コネクター（インジェクター））の筒先に装着する。

**<使用方法等に関連する使用上の注意>**

1. 本品に衝撃を与えないこと。〔破損する可能性がある。〕
2. 本品接続時は、以下の事項を順守すること。
 - （1）本品をケモセーフファイン（コネクター（インジェクター））以外に使用しないこと。〔互換性のない医療機器に接続すると外れの可能性がある。〕
 - （2）接続部分に薬液又は血液を付着させないこと。〔接続部の緩みが生じ脱落する可能性がある。〕

- （3）横方向の力を加えないこと。〔脱落する可能性がある。〕
3. 廃棄する際は、抗がん剤等の曝露に注意し、廃棄すること。

【使用上の注意】**<重要な基本的注意>**

1. 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
2. 包装に汚染が認められる場合は使用しないこと。
3. 本品を極端な低温環境下（冷蔵庫内と同等以下の温度）で保管する場合は、取扱いに注意すること。
4. 不具合が発生した場合は、新しい製品と交換すること。

【保管方法及び有効期間等】**<保管方法>**

水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

使用期限は外箱に記載（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社

電話番号：0120-12-8195 テルモ・コールセンター