

一般医療機器

機械器具(58) 整形用機械器具
歯科用インプラント手術器具 JMDN コード：70965001

パラドリルエイド


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- (1) 本品を変形させたり切削したりする等の加工・改造は行わないこと。
- (2) 歯科治療以外の目的で使用しないこと。また、落下させる等、使用時に必要以上の力を加えないこと〔折損・曲がりなどの原因になり得る〕。

【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼である。

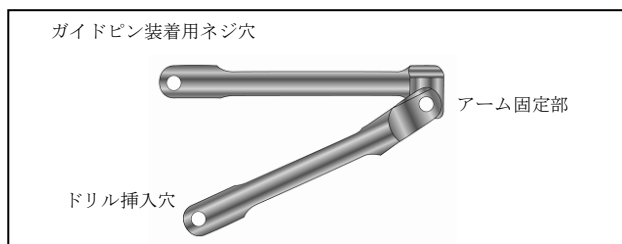

＜原理等＞

ガイドピン装着用ネジ穴とドリル挿入穴は平行に穴が開いている。そのため、ネジ穴に装着したすべてのインプラントの植立位置を平行に穿孔することができる。

品名	包装
○パラドリルエイド	1 セット
(パラドリルエイド 本体 1 個、ガイドピン S・L 各 1 本)	

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具をいう。手動式で、再使用可能である。

【使用方法等】

＜装着方法＞

- ・本体のガイドピン装着用ネジ穴に、ガイドピンを取り付ける。
- (1) ガイドピンは、ドリル孔の深さにあわせて S もしくは L を選択する。
 - (2) ガイドピンの取り付けは、ネジ穴の上下どちらからでも可能である。
 - (3) ガイドピンを取り付ける際は、ピンが落ちないようにネジをしっかりとしめること。

＜使用方法＞

- ・全てのドリリングは、十分な注水下で行うこと。
- (1) 植立位置をマーキングドリル（リンデマンボーンカッターが最適）でマークする。
 - (2) 専用ツイストドリルにて、前歯部の最も打ちやすい場所の最適な角度に 1 本だけ穿孔する。
 - (3) ガイドピンを穿孔した部位に差し込み、軸とする。ドリル挿入穴に専用ツイストドリルをくぐらせ、残りの植立位置を穿孔する。
 - (4) 続いて、最終ドリルまで通法により拡大を行う。

【使用上の注意】

＜使用注意＞

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

- (2) 使用前にドリルを挿入して回転させ、異常がないか確認してから使用すること。
- (3) 使用時に無理に力を加えると平行にズレが生じる場合があるため注意すること。
- (4) 製品の仕様は改良のため、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- (5) 使用前に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか確認すること。

**＜重要な基本的注意＞

ドリル挿入穴に、合わないドリルを無理に挿入しないこと。
本品には、オプションの専用ドリルの使用を推奨いたします。
推奨品：テクニカ ツイストドリル 2.0 L I（内部注水）
ツイストドリル 2.0 L（外部注水）

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- (1) 錆びる恐れがあるため水分が付着したまま保管しないこと。
- (2) 本品はステンレス製ですが、湿度の高い場所に長時間放置しますと錆びて使用出来なくなる恐れがあるため、湿度が低く、清潔な場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 本品は、一般歯科用の消毒が可能である。
- (2) 強アルカリ・強酸性洗剤、消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるため使用を避けること。
また、金属タワシ、クレンザー（磨き粉）などは、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- (3) 本品は、オートクレーブの滅菌が可能である。
- (4) 使用前にアーム固定部がスムーズに可動することを確認すること。
- (5) アーム固定部の動きが固くなったときは、ハンドピース等に使う歯科用オイルを注油すること。使用方法是、オイルメーカーの指示に従うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 5-3-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624