


サイレンジ式スーパーフォーセップス

【禁忌・禁止】

クランプの拡張は歯牙の最大豊隆部+0.2mm以内とし、必要な巾以上に本品を広げないこと。[器具の破折の恐れがある]

【形状・構造及び原理等】

本品の材質は、ステンレス鋼である。

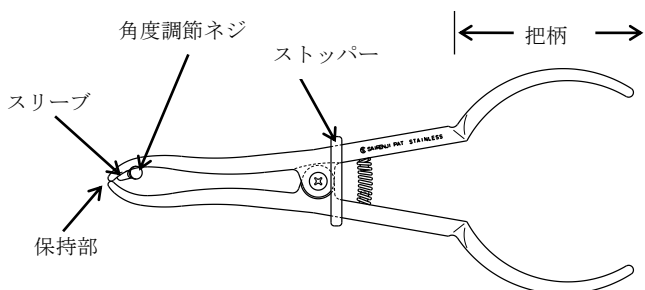

【使用目的又は効果】

ラバーダムクランプや西連寺ダムプロテクターの適用及び除去に用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

- (1) クランプをフォーセップスに装着し、把柄を握って拡張させる。
- (2) クランプを静かに歯頸に適合させ、徐々に把柄の握力を弱めて、フォーセップスをクランプより取り外す。

【使用上の注意】

- (1) 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- (2) 使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。
- (3) 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- (5) 電気メスをを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、併用しないこと。
- (6) 器具の形態変更や改造・分解等はないこと。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- (1) 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行ない、次回からの使用時にも同様に行なうこと。
オートクレーブ可 121℃で20分間
- (2) クランプの拡張は歯牙の最大豊隆部+0.2mm以内とすること。
- (3) 口腔内にクランプを落とさないように最大の注意を払うこと。
- (4) クランプの歯牙への取り付けは周辺歯肉等に十分配慮すること。
- (5) 指等をはさまないように注意すること。
- (6) 着脱可能部品があるので、口腔内に入れる前に確実な装着を確認し、誤飲・紛失には十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- (2) 汚染及び錆を防ぐため、湿度が低く清潔な場所にて保管・管理すること。
- (3) 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
- (4) 水分及び薬品等が付着したまま保管しないこと。
- (5) 長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、クランプ保持部の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- (2) 強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。
- (3) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売元

株式会社デンテック
〒174-0053 東京都板橋区清水町 53 番 5 号
TEL：03-3964-2011
FAX：03-3962-5624

2. 販売元

西連寺トレーディングCO., LTD.
〒142-0064 東京都品川区旗の台 3-14-9
TEL・FAX：03-3784-1454