


一般医療機器

機械器具(58) 整形用機械器具
歯科用インプラント手術器具 JMDN コード: 70965001


M・マジックデタッチャー

【形状・構造及び原理等】


- ① M・Magic Detacher 1
材質: ステンレス鋼

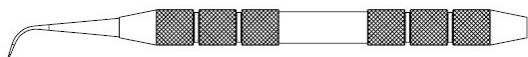


- ② M・Magic Detacher 2
材質: ステンレス鋼

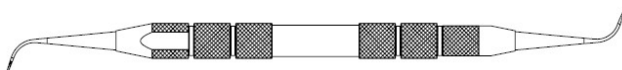

- *③ M・Magic Detacher Probe
材質: ステンレス鋼 (取外しタイプ)

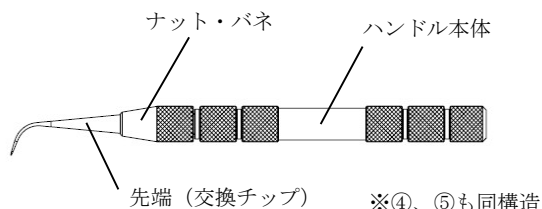

- *④ M・Magic Detacher Blade Vertical
材質: ステンレス鋼 (取外しタイプ)

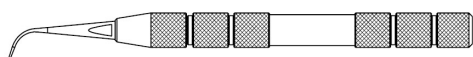

- *⑤ M・Magic Detacher Blade Horizontal
材質: ステンレス鋼 (取外しタイプ)



- *⑥ M・Magic Detacher 交換チップ Probe
材質: ステンレス鋼



- *⑦ M・Magic Detacher 交換チップ Blade Vertical
材質: ステンレス鋼



- *⑧ M・Magic Detacher 交換チップ Blade Horizontal
材質: ステンレス鋼



【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具をいう。手動式で、再使用可能である。

*【使用方法等】

インプラント手術時の粘膜の剥離に使用する。
取外しタイプは、ハンドル本体にバネを挿入し、ナットを装着する。交換チップを装着する際は、交換チップ後端をハンドルの穴に挿入し、ナットを締め付け固定する。交換チップを取り外す際は、ナットを緩めハンドルから交換チップを取り外す。

【使用上の注意】

【使用注意】

本品は先端が大変鋭利なため、取扱いには十分に注意すること。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- (1) 本品は使用前に、傷・バリ・ガタつき・緩み等の異常がないことを必ず確認すること。使用に適さない場合は、新品に交換すること。
- (2) 使用前は、必ず単体にて洗浄・滅菌を行うこと。(オートクレーブ条件: 121℃ 20 分間) 取外しタイプについては、分解して洗浄・滅菌を行うこと。その他の詳細は【保守・点検に係る事項】を参照。
- (3) 使用後は、付着している血液・組織及び薬品等が乾燥する前に洗浄すること。洗浄には、必ず歯科小器具専用の防錆剤入り器具洗浄剤を使用すること。洗浄剤の使用法は各メーカーの説明書に従うこと。
- (4) 先端の状態は、使用前に必ず確認すること。本品の長期の使用により金属疲労や摩耗等による先端の変形が認められた場合や、使用に適さない場合は、新品に交換すること。
- (5) 本品の部品の脱落は、誤飲等の重大事故につながる危険性があるため、十分に製品の状態を確認し、注意して取扱うこと。
- (6) 本品は先端が鋭利なため、硬組織にひっかけた状態で強い力を加えると折れる可能性があることから、使用には十分に注意すること。
- (7) 取外しタイプについては、交換チップがハンドルから外れなくなるおそれがあるので、交換チップを挿入しナットで固定するときは、強く締めすぎないこと。(レンチ等の器具を用いて固定しないこと)
- (8) 取外しタイプについては、ナット及びハンドル本体のねじが破損するおそれがあるので、交換チップを挿入しない状態での空締めはしないこと。

【重要な基本的注意】

本品の使用により、患者にアレルギー反応等の異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、専門医の治療を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- (1) 洗浄・滅菌・乾燥後に、本品を保管するにあたっては、必ず単体にて保管すること。また、滅菌及び乾燥する際は、本品を他の異種金属製品と合わせて扱うことは避け、必ず単体で扱うこと。
- (2) 保管にあたっては、錆びるおそれがあるため、湿度が低く清

取扱い説明書を必ずご参照ください。

潔な場所に本品を単体にて保管すること

【保守・点検に係る事項】

- (1) 洗浄・消毒をする際は、強アルカリ／強酸性洗剤・消毒剤の仕様により、本品を腐食させるおそれがあるため、使用を避けること。
- (2) オートクレーブ滅菌をする際は、精製水を使用し、水道水を使用しないこと。
- (3) 洗浄・汚物除去をする際は、金属たわし、クレンザー（磨き粉）等を使用すると、本品の表面が損傷するため、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売元

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

TEL: 03-3964-2011

FAX: 03-3962-5624

2. 販売元

株式会社プラトンジャパン

〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56 鶴川アカデメイアビル

TEL: 042-734-8088 (代)

FAX: 042-737-6708

取扱い説明書を必ずご参照ください。