


機械器具（58） 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 JMDN コード：70965001

アルタサージカルガイド用ツール

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

- (1) アルタサージカルガイド用アンカー φ1.55

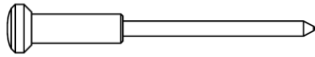

- (2) アルタサージカルガイド用スリーブ φ1.55



2. 原材料

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる器具をいう。

【使用方法等】

＜使用方法＞

- サージカルガイドを対象部位に配置する。
- アルタサージカルガイド用ドリルをサージカルガイドのアルタサージカルガイド用スリーブ φ1.55 に挿入し、骨に固定用の孔を形成する。
- サージカルガイドのアルタサージカルガイド用スリーブ φ1.55 から形成した孔にアルタサージカルガイド用アンカー φ1.55 を挿入し、サージカルガイドを固定する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 使用前に、汚れ・傷・曲がり等に以上がないか確認すること。
- 本品を確実に奥まで挿入し、サージカルガイドが固定されていることを確認すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 使用前に必ず【保守・点検に係る事項】に記載する方法及び条件に基づき洗浄、滅菌を行うこと。
- 本品の使用前又は使用中に、汚染、錆などがみられる場合は、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。
- 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 腐食を防ぐため、洗浄後は直ちに乾燥させ、湿気の少ない場所に保管すること。
- 汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
- 製品の識別のため、商品ラベルを大切に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

使用前に、汚れ、傷、損傷等の異常がないか点検すること。

＜洗浄・滅菌方法＞

- 錆びる恐れがあるため次のことに留意すること。
 - 血液・骨が凝固付着したまま乾燥させないこと。
 - 最終洗浄は精製水を使用すること。

- 乾燥はなるべくドライヤー等を用いて強制的に乾燥させること。
 - 汚れ、水分、洗浄剤などが付着したまま滅菌しないこと。
 - オートクレーブ滅菌の場合、精製水を用い、水道水は使用しないこと。
 - 錆びた製品は、汚染を引き起こす可能性があるため、錆びていない製品と一緒に滅菌しないこと。
 - 汚染したおそれのある場合には、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。
- 本品の消毒用薬液は、防錆効果のある次のものを推奨する。その際、使用方法是各薬液の指示に従うこと。
 - グルコン酸クロルヘキシジン（例：ヒビテン）
 - 界面活性剤系薬液（例：塩化ベンゼトニウム液、塩化ベンザルコニウム液）
 - 次の成分を含む消毒用薬液は使用しないこと。
 - 塩素系薬液（次亜塩素酸ナトリウム等）
 - 過酸化水素系薬液（オキシドール等）
 - 強酸性水
 - 乾熱滅菌は、高温になり劣化の原因になるので使用しないこと。
 - オートクレーブの機種によっては、滅菌バッグが湿った状態で乾燥工程が終了することがあり、その際、滅菌バッグとドリル等が接していると、錆の発生原因となるため、滅菌ケース、必要に応じてパースタンド等を用いて、ドリル等と滅菌バッグが接触しないようにすること。
 - 滅菌は 121℃で 20 分間のオートクレーブ滅菌とする。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社デンテック

〒174-0053 東京都板橋区清水町 53-5

TEL：03-3964-2011

FAX：03-3962-5624

2. 販売業者

株式会社アルタデント

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田 2-8-31

第三東洋ビル 2F

TEL：06-6377-2221

FAX：06-6377-2223