


機械器具(02) 医療用照明器  
一般医療機器 額帯灯 11963000  
えがおライト

【禁忌・禁止】

点灯と充電を同時に行わないこと。  
バッテリーの充電ポートと出力ポートを短絡させないこと。  
60℃を超える環境で使用・保管及び放置は行わないこと。

【形状・構造及び原理】

本品は照射機能を持つヘッド部とその電流を供給するバッテリー一部及び頭部装着用のベルトから構成される。

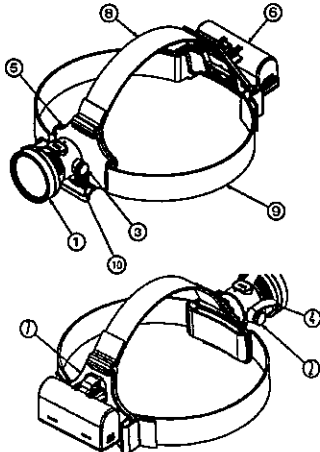

|   |             |
|---|-------------|
| ① | 照射ヘッド       |
| ② | スイッチ A      |
| ③ | スイッチ B      |
| ④ | 調光レバー       |
| ⑤ | ベースプレート(前)  |
| ⑥ | バッテリー       |
| ⑦ | ベースプレート(後)  |
| ⑧ | ヘッドベルト(トップ) |
| ⑨ | ヘッドベルト(サイド) |
| ⑩ | ループ取付バー     |

【使用目的又は効果】

手術者の頭部に装着するよう設計された装置(ランプ)をいう。ベルト又はヘルメットフレームに取り付けて手術者の前頭部に配置し、手術、診断、治療中に視野を直接照明するものである。通常、拡大レンズ、反射器、光ファイバケーブル(冷光の送達又は電池バックからの電源供給用)の接続部から構成される。

- ・照射部  
搭載 LED 1W LED  
光束 最大約 100 ルーメン(1W 点灯時)  
照射角度 約 15° (1/2 ビーム角)  
色温度 約 5,000K  
演色性 Ra95
- ・バッテリー部  
バッテリー リチウムイオンバッテリー  
(18650 サイズ x1 セル)  
バッテリー容量 3.7V 3000mAh (11.1Wh)  
バッテリー電圧 入力: 5V / 出力: 5V  
接続方式 充電: Micro USB 出力: USB
- ・その他  
調光 3 段階ステップ調光(ループ式)

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 連続点灯<br>時 間 | 光束/点灯時間<br>100lm/300min 55lm/600min 30lm/1000min                |
| 防水仕様        | 適用部位: 照射ヘッド(バッテリー、ケーブルは防水未対応)<br>防水仕様: 生活防水レベル JIS 保護等級 IPX3 相当 |
| 操作仕様        | メインスイッチ(2 ボタン同時押し)、点灯・消灯切替スイッチ(2 ボタン同機能)、調光レバー                  |
| 大 き さ       | ライト側: 外径Φ46mmx 奥行き 48mm<br>バッテリー側: 幅 75mmx 奥行き 24mmx 高さ 35mm    |
| 重 量         | 照射ヘッド: 77g バッテリー: 70g その他: 67g<br>合計: 214g                      |
| 材 質         | ポリカーボネート、アルミ、ステンレス、シリコンゴムなど                                     |
| 安全機構        | 過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護、高温保護                                     |
| 安全規格        | PSE(電安法)                                                        |

【使用方法】

ご使用前に取扱説明書を良くお読みになって下さい。

1. 主電源の入れ方  
照射ヘッド部左右の銀色のボタンを同時に1秒間長押しすると主電源が ON になり、照射ヘッドの青色 LED が点灯します。
2. 明るさの調節は調光レバーを押して調節します。レバーを押すごとに強・中・弱の3段階に調節ができます。
3. 使用中の ON/OFF は左右銀色のボタンどちらを押しても可能です。
4. 照射角の調整は照射ヘッドを持ち、ゆっくりと丁寧にやって下さい。
5. 使用が終了したら、照射ヘッド左右の銀色のボタンを同時に1秒間長押しして、主電源を OFF にして下さい。

【使用上の注意】

ご使用の前に取扱説明書を良くお読みになって下さい。

1. 周囲の人の目に直接光線が入らないように注意すること。
2. 本製品の光を直視しないこと。
3. 樹脂部はアルコール、塩素系殺菌剤等や紫外線殺菌灯で変色することがある。
4. 蒸気滅菌は行わないこと。
5. 本製品の改造は行わないこと。又、絶対に分解しないこと。
6. 使用時に照射ヘッドやバッテリー部から発熱や異臭がした場合は直ちに使用を中止すること。
7. バッテリーの水濡れに注意すること。
8. 高温多湿になる環境には保管しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

-5℃～+25℃が望ましい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
株式会社デントロケミカル  
TEL0428-30-7450

取扱説明書を必ずご参照ください。