


機械器具 6 8 印象採得又は咬合採得器具
*一般医療機器 歯科印象材用シリンジ（JMDNコード：35860000）

ルックシリンジ

【形状・構造及び原理等】

形状

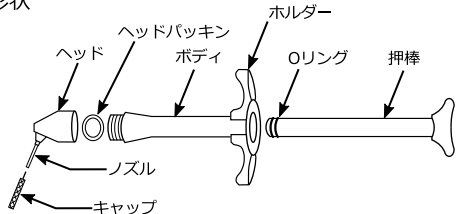

構造：ボディ部・押棒部・ヘッド部で構成され、ボディ部にはホルダーが装着されている。

原理：寒天印象材のシリンジタイプをボディ部に挿入し、押棒を押すことにより先端のノズルから寒天印象材を流出させるものである。

種類・サイズ

種類	色	針径	針長
2S	茶	0.8mm	10mm
2L	青	0.8mm	17mm
3S	緑	1.2mm	10mm
3L	灰	1.2mm	17mm

材質・組成

部品名	材質
キャップ	真鍮 Niメッキ
ノズル・押棒	ステンレス
ヘッドバックシン・Oリング	フッ素ゴム
ヘッド・ホルダー	ポリプロピレン樹脂
ボディ	ポリサルフォン樹脂

【使用目的又は効果】

本器具は、印象採得をする寒天印象材の注入器である。

【使用方法等】

- 1) ヘッド部のキャップを外します。
- 2) シリンジボディ部から押棒を抜きます。
- 3) 寒天印象材をボディ部に挿入します。
- 4) ボディ部に押棒を挿入します。この時、寒天印象材に押棒を当てながら押し込み、またノズルから寒天印象材が数ミリ出るまで押棒を押し込みます。
- 5) ノズルから出た寒天印象材を捨て、キャップを閉めます。
- 6) コンディショナーにセットし、溶解・保存をします。
- 7) 手に寒天印象材を押し出し、寒天印象材の溶解具合などを確認してから使用します。

【使用上の注意】

1. 使用時の注意

- 1) ヘッド部に装着するキャップは、必ず同じサイズのを確認して装着すること。他のサイズのを装着すると、破損の原因となります。
- 2) ヘッド部着脱の際は、必ずキャップが取り付けられていることを確認すること。キャップが取り付けられていない場合、ノズル部分に無理な力がかかり破損につながります。
- 3) ボディにヘッドを取り付ける際、無理な力による締め付けを行うと、破損の原因となります。
- 4) レジン用のモノマーや溶剤がボディに付着すると、亀裂やヒビ割れの原因となります。
- 5) 本品に摩耗・亀裂・ヒビなどが確認された場合は、使用をとりやめること。

- 6) 本器具の落下等の衝撃は、破損の原因となるので、取扱いに注意すること。

2. 洗浄・消毒・滅菌時の注意

- 1) 洗浄・消毒・滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で金属腐食を起こすことがあります。
- 2) 薬液消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼすことがあります。
- 3) 本器具は樹脂製のため、オートクレーブ滅菌は耐熱温度に注意すること。（乾燥工程は除くこと）
- 4) 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分に乾燥させてから保管すること。水分が付着したままで長時間放置すると、サビ・シミ等の原因となる事がある。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

- 1) 直射日光のあたる場所を避けて保管すること。
- 2) 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 保守・点検

- 1) 押棒をスムーズに作動させるために、Oリングにワセリン等の塗布すること。
- 2) 押棒のOリングやヘッドバックシンは劣化するので定期的に交換すること。
- 3) ヘッド部やノズル部の残留寒天は完全に除去すること。
- 4) ヘッドやボディのネジ摩耗・亀裂などを、使用前に必ず確認すること。

2. 洗浄・消毒・滅菌

- 1) 使用後は、防錆洗浄液・精製水を用いて器具に付着した血液・体液・組織片を速やかに除去すること。
- 2) 洗浄・消毒・滅菌後の器具は水分を除去し、十分に乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社デントロニクス
電話03-3209-7121