

作成年月日： 2008年5月1日
改定年月日：

製造販売届出番号： 11B2X00040000249
医療機器製造販売業許可番号： 11B2X00040

【一般医療器】

類別：器 22

類別名称：検眼用器具

JMDN コード：34653000

一般的名称：検眼レンズ

クラス分類：I

特定保守：非該当

販売名：TMI-3 燐式スキヤスコープ

【禁忌・禁止】

本品は測定器なので、曲げたり汚したりしないこと、

【使用目的、又は効果】

本品は患者の視力を測定し、眼鏡処方箋を作成する目的で使用する。

【形状、構造及び原理】

5本の木製の板に、板状の光学部レンズを組み込んでいる。
レンズの種類：

■.25/+0.5/+0.75/+1.0/+1.25/+1.5/+1.75/+2.0/+2.25/
+2.5/+2.75

■+3.0/+3.25/+3.5/+3.75/+4.0/+4.5/+5.0/+5.5/+6.0/
+6.5/+7.0

■+8.0/+9.0/+10/+11/+12/+13/+14/+16/+18/+20/+22

■-0.25/-0.5/-0.75/-1.0/-1.25/-1.5/-1.75/-2.0/
-2.5/-3.0

■-3.5/-4.0/-5.0/-6.0/-7.0/-8.0/-10/-12/-14/-16/-18

【使用上の注意】

- ・知識をもった医療従事者が使用すること。
- ・使用前に破損や傷がないか確認すること。
- ・破損や傷がある場合は直ちに使用を中止すること。
- ・測定時に患者の角膜の触れないように注意すること。
- ・傾斜のある場所では、落下の危険があるので保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前に破損や印刷面に傷がないか確認すること。
- ・使用する・しないにかかわらず清潔を保つこと。
- ・使用後は乾いた布でほこりを払うこと。
- ・使用後は直射日光や電球の光に当たらない場所に保管すること。
- ・傾斜のある場所では、落下の危険があるので保管しないこと。

【貯蔵方法】

- ・乾いた布でほこりを払い、直射日光や電球の光に当たらない場所に保管すること。
- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこりなどにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に貯蔵・保管すること。
- ・傾斜のある場所では、落下の危険があるので保管しないこと。

【製造元】


株式会社 テイエムアイ

【医療機器製造販売業者】

株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1-2-10

Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913

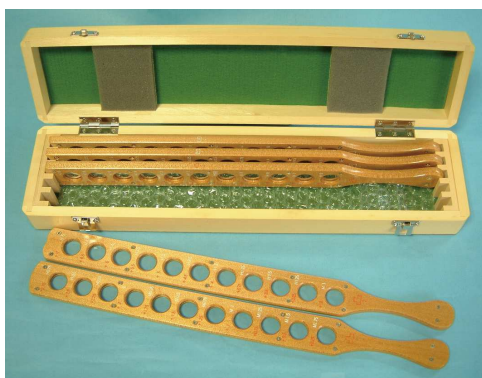

1本の重量：約40g

【使用方法】

レチノスコープを使用し、光源を投射するほか、網膜表面の照明を受けた領域の動き及び放出光線の屈折を観察することにより、屈折異常を検査・診断する。