


4560123896523

TMI-V5030



4560123896530

TMI-V5040

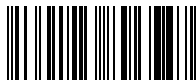

4560123896547

TMI-V5050



4560123896554

TMI-V5070



4560123896561

TMI-V5100

添付文書

作成年月日： 2011年4月25日

医療機器製造販売業許可番号： 11B2X00040

改定年月日：

【一般医療器】

類別：医 06

類別名称：視力表及び色盲検査表

JMDN コード：16800000

一般の名称：視力表

クラス分類：I

特定保守：非該当

販売名

製造販売届出番号

TMI-V5030 C ランドルト近距離視力表 30cm	:	11B2X00040000288
TMI-V5040 C ランドルト近距離視力表 40cm	:	11B2X00040000289
TMI-V5050 C ランドルト中距離視力表 50cm	:	11B2X00040000290
TMI-V5070 C ランドルト中距離視力表 70cm	:	11B2X00040000291
TMI-V5100 C ランドルト中距離視力表 100cm	:	11B2X00040000292

〔禁忌・禁止〕

本品を曲げ、等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

〔使用目的、効能又は効果〕


眼科検査時に、視力の測定を行う機器である。

〔形状、構造及び原理〕

- ・視標が「C ランドルト環」で、検査距離ごとに精密に計算され、両面に印刷されている。
- ・視標には各検査距離のヒモがついており、検査距離が保てるようになっている。

サイズ：30cm×21cm

付属品：アンサーカード

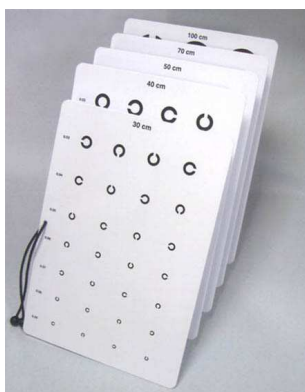**〔操作方法、又は使用方法〕**

- ・検査距離を各検査距離に保つ。
- ・片眼を遮蔽して、上から（大きい文字から）横一列を読ませる。
- ・一列の内、50%以上正解したら、次の列へと移動する。
- ・これを続け、最終に読めた列の視力を記録する。

〔使用上の注意〕

- ・知識をもった医療従事者が使用すること。
- ・使用前に破損や印刷面に傷がないか、印字のかすれや視力表の色あせを確認すること。
- ・破損や傷、印字のかすれや色あせがある場合は直ちに使用を中止すること。
- ・使用後は乾いた布で印刷面のほこりを払うこと。

〔保守・点検に係る事項〕

- ・使用前に破損や印刷面に傷がないか、印字のかすれや視力表の色あせを確認すること。
- ・使用後は乾いた布で印刷面のほこりを払うこと。
- ・使用後は直射日光や電球の光に当たらない場所に保管すること。

〔貯蔵方法〕

- ・乾いた布で印刷面のほこりを払い、直射日光や電球の光に当たらない場所に保管すること。
- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこりなどにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に貯蔵・保管すること。

〔製造元〕

Precision Vision（プレジジョン・ビジョン）

〔輸入先国〕**〔医療機器製造販売業者〕**

株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1-2-10

Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913

医療機器製造販売業許可番号：11B2X00040