

【一般医療器】

類別:医 04

類別名称:整形用品

JMDNコード::11661000

一般的名称:医療用スポンジ

クラス分類: I

特定保守:非該当

販売名:TE-40430 アイドレイン 80cc

【禁忌、禁止】


- ① 器具の改造、調整など二次加工は破損の原因になるので行わないこと。
- ② 再使用禁止
- ③ 再滅菌禁止
- ④ 本器にアレルギーを示す患者にしようしないこと

【使用目的、又は効果】

眼科手術・処置の際、各組織の水分や体液等を吸水し、手術をスムーズに行うために使用する器具である。

【形状・構造】

本器は PVA を眼科手術用に加工したもので、眼科手術・処置の際、各組織の水分や体液等を吸水し、手術をスムーズに行う。

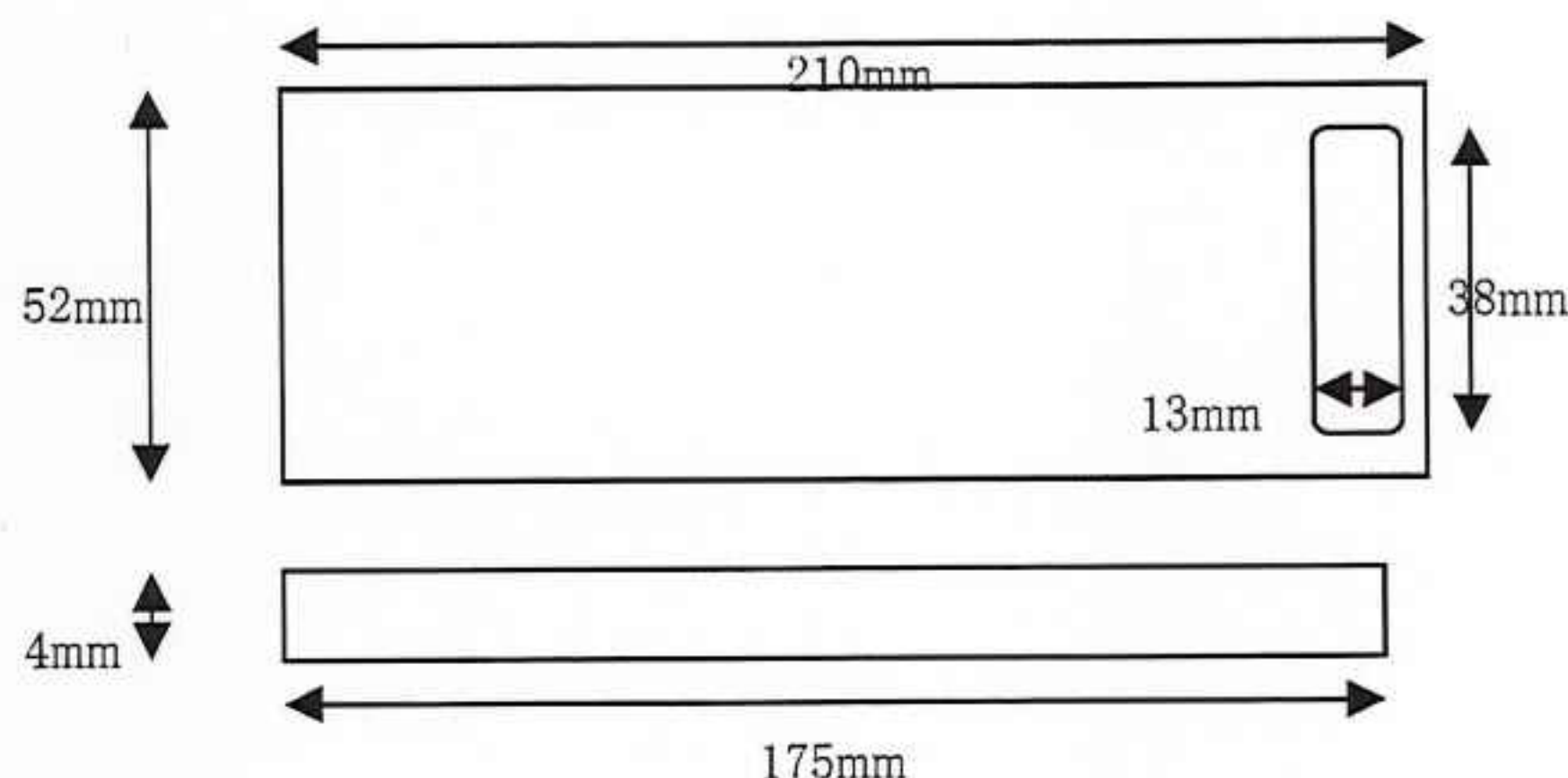

【材質】 PVA

【使用方法】

眼科手術・処置の際、スポンジ部分を眼の各組織に当て吸水等を行い、吸水した液体等をポリエチレン袋内に受水させる。

【使用上の注意】

- ・知識をもった医療従事者が使用すること。
- ・使用前に破損や傷、異物がないかを確認すること。
- ・破損や傷、異物がある場合は直ちに使用を中止すること。
- ・本器に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

【保管方法】

- ・水のかからない場所、直射日光に当たらない場所に保管すること。
- ・破損や傷が生じないように保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこりなどにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に貯蔵・保管すること。

【有効期限】

- ・5年/外箱及び滅菌済の内袋に印刷されている日付を確認すること。使用期限年月日は下記マークの横に印刷されている。



- ・破損や傷、異物がある場合は直ちに使用を中止し、交換すること。

【製造元】

Tecfen Medical(テクフェンメディカル)

United States of America(アメリカ)

【医療機器製造販売業者】

株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1-2-10

Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913

医療機器製造販売業許可番号:11B2X00040