

【一般医療器】 類別：器 22

類別名称：検眼用器具

JMDN コード：37071000

一般的名称：両眼視機能検査装置 クラス分類：I

特定保守：非該当


販売名：恐竜ステレオテスト

【警告】

本品は測定器なので、曲げたり汚したりしないこと

【形状・構造及び原理等】

【外観写真】

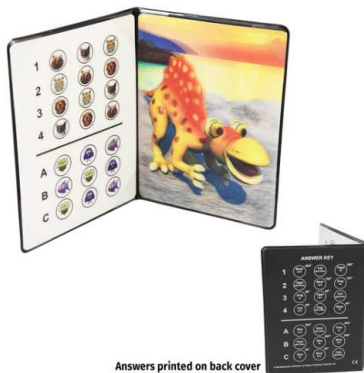

本製品の基本構成は以下の通りである。

基本構成は以下の通りである。

取扱説明書、検査表/プレート 1、プレート 2

【検査表】

■検査距離/40cm

■視差/400 秒～40 秒

【使用方法・判定】

両眼視機能検査を行う眼科用機器である。

【使用方法等】

プレート 1・・・恐竜が飛び出しているかを確認し、全体的な立体視をテストする。

プレート 2・・・飛び出している動物・キャラクターの位置を答えてもらい、視認できる最小視差まで測定する。

【使用における注意事項】

- 1) 本器は、使用される前に必ずこの取扱説明書の内容を理解した上でお取扱い下さい。
- 2) 本器は、知識をもった医療従事者が使用して下さい。
- 3) 本器は、使用目的以外に決して使用しないで下さい。
- 4) 検査面は、手を触れたり擦ったりしないで下さい。
汚れた場合は、乾いた柔らかい布で軽くはらって下さい。
水や洗剤を使用しての掃除は行わないで下さい。
- 5) 本器は、蛍光灯・自然光に当たると変色は免れないため、必要時
間外には閉じて下さい。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意-検査条件>

■検査距離/40cm、■照度/明室

■注意/抑制検査では、影やむらのある照明、壁や洋服などの色が照明に反射しないように注意する。

【保管方法及び有効期限】

- ・乾いた布でほこりを払い、直射日光や電球の光に当たらない場所（傾斜のある場所では、落下の危険があるので保管しないことに注意する事が望ましい）に保管すること。
- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこりなどにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に貯蔵・保管すること。

【製造元】

Precision Vision

(プレジジョン・ビジョン)

【輸入先国】

United States of America

(アメリカ)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1 丁目 2 番 10 号 Tel:048-481-2501

緊急連絡先 株式会社 テイエムアイ : Tel:048-481-2501