

作成年月日： 2023年7月17日  
改定年月日：

製造販売届出番号： 11B2X00040000690  
医療機器製造販売業許可番号： 11B2X00040

【一般医療器】

類別：医 06

類別名称：視力表及び色盲検査表

JMDN コード：32786000

一般的名称：アムスラーチャート

クラス分類：Ⅰ

特定保守：非該当

販売名：#181700 アムスラーチャート


〔禁忌・禁止〕

本品を曲げ、等の二次的加工(改造)することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

〔使用目的、効能又は効果〕

視野の中心部及び傍中心部の不整を速やかに検出することを目的とした眼科用器具である。

〔形状、構造及び原理〕

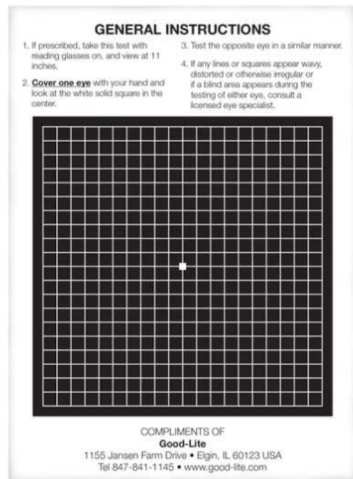

■標準・・・アムスラーチャート(250枚入り)

〔操作方法、又は使用方法〕

約 30～40cm の距離で片目を完全に覆い、もう片方の目で真中の白い点を注視して下さい。

(近用メガネやコンタクトレンズをした状態で見ます。)テストは片目ずつ行います。

格子状の白線がゆがんで見える、中心が見えない、黒く欠ける、薄く見える部分などがある場合、網膜の中心(黄斑部)を含めた疾患が疑われます。

〔使用上の注意〕

知識をもった医療従事者が使用すること。

使用前に破損や印刷面に傷がないか、印字のかすれや本器の色あせを確認すること。

破損や傷、印字のかすれや色あせがある場合は直ちに使用を中止すること。

〔保守・点検に係る事項〕

使用前に破損や印刷面に傷がないか、印字のかすれや視力表の色あせを確認すること。

使用後は直射日光や電球の光に当たらない場所に保管すること。

〔貯蔵方法〕

直射日光や電球の光に当たらない場所に保管すること。

水のかからない場所に保管すること。

気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこりなどにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に貯蔵・保管すること。

〔製造元〕

Good-Lite.CO(グット・ライト)

〔輸入先国〕

United States of America(アメリカ)

〔医療機器製造販売業者〕

株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1-2-10

Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913

医療機器製造販売業許可番号:11B2X00040