

歯科材料 03 義歯床材料
管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン JMDN 70825000


アクリトーン ディスク

【禁忌・禁止】

メタクリレートモノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある者は使用しないこと。

【形状・構造及び原理】

形状・構造：

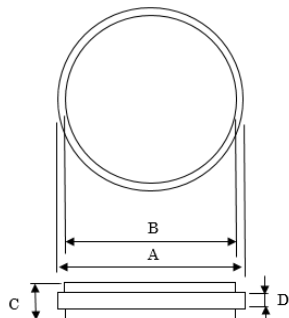

寸法 (mm)			
A	B	C	D
φ98.5	φ94	t22	t10
φ98.5	φ94	t25	t10

主成分：ポリメタクリル酸メチル、色素
色調：#0（クリアー）、#7（ライブピンク）

原理：本品は加熱加圧成形されたレジン製ディスクであり、歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニットにより切削し、歯科修復物又は補綴物を作製する。

【使用目的又は効果】

義歯床、仮床、バイトプレート、個人トレー、ナイトガード、スプリント等を作製するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 光学印象採得装置等によって取得した印象を基に、ソフトウェアを用いて加工用データを作成します。
- 本品をミリングマシンに設置し、加工用データを用いて切削加工します。
- 本品と人工歯を接着する場合は、アクリル系の常温重合レジンを用いて接着してください。
- 通法に従い、形態修正及び研磨を行ってください。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 本材は PMMA を主原料とした CAD/CAM 用切削加工材料であるため、適切な切削器具、切削条件を適用すること。
- 印象採得、切削加工を行う際は、各装置の添付文書又は取扱説明書に従って、本品に適応した加工条件を用いること。
- 98.5 mm の標準ディスクホルダーのある CAD/CAM システムで、専用の切削器具を用いて加工すること。
- 本品を削合する際は、回転器具による加熱に注意すること。

- クラックが発生するおそれがあるため、本品及び本品で作製した補綴物を高温多湿の環境又は 70℃ 以上の高温水と接触させないこと。
- 白化が発生するおそれがあるため、本品及び本品で作製した補綴物を 50% 以上のアルコールと接触させないこと。
- 本品で作製したノンクラスプデンチャーを調整する場合は、軟質リライニング材を使用すること。
- 本品で作製したノンクラスプデンチャーのアーム部に、歯科表面滑沢硬化剤を使用しないこと。
- 本品と人工歯を接着する場合は、適切な歯科用接着材を選択し、添付文書又は取扱説明書に従って使用すること。

※推奨する歯科用接着材

ティースロックボンド（認証番号：307AHBZX00008000）

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 本品は【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。
- 本品を研削、研磨する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所粉塵装置、公的機関が認可した防塵マスク、保護メガネ等を使用すること。
- 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 火気、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

- 本品は包装に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は当社データによる。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社
住所：京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3
電話番号：075-672-2118

製造元：デンケン・ハイデンタル株式会社