

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器および穿孔器*
一般医療機器 歯科用プラスチックバー 70684000


PMT C プラスチックチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】*

- 1 分間 10,000 ストロークを超えるスピードでの使用はしないこと。
- 本品の使用により発疹、皮膚炎等の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 本品は、単回使用のため、再使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】*

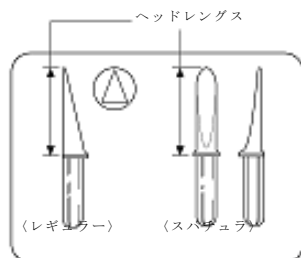

材質：高密度ポリエチレン(HDPE)
形状及び構造：上図のとおり

【使用目的又は効果】*

プラスチック製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、特に軟化象牙質を研削するために用いる回転式研削器具をいう。

【使用方法等】*

本品を当社取扱い 歯間研磨用ハンドピース PMTC コントラ 100/25(医療機器許可番号:09BZ5011)に装着し、隣接面にチップを挿入、圧接し、歯牙の清掃を行います。歯面にプラスチックチップを当て操作する時間は、一般的に一歯面 1～3 秒が適切です。上記以外のコントラでのご使用は脱落の恐れがあるため、ご遠慮ください。

使用回転数：9,000～10,000rpm

【使用方法に関連する使用上の注意】*

- ① 本品の軸部をハンドピースに最後まで確実に挿入し、抜け落ちないことを確認すること。
- ② 予め患者の口腔外で作動させて、ブレがないことを確認すること。
- ③ 破損の原因になり得るので、無理な角度、過度の加圧でのしようは避けること。

【使用上の注意】**

- ① ハンドピースの製造業者の指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入することを確認すること。
- ② 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- ③ 過度の回転数のもと使用しないこと。
- ④ 目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ① 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の名称等】

製造販売業者：株式会社オーラルケア

住所：〒116-0013
東京都荒川区西日暮里 2-32-9

電話番号：03-3801-0151
FAX 番号：03-3801-0188

製造業者：栃木精工株式会社(日本)