

**2020 年 2 月改訂（第 7 版）
*2015 年 2 月改訂（第 6 版）


機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 歯列矯正用ワイヤ 16204000
V I M - N T

【禁忌・禁止】

ニッケル・本合金、類似成分の合金又は配合成分に対して、
発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用し
ないこと。

【形状・構造及び原理】**

- 1) 原材料：ニッケルチタン（ニッケル(54.5～57.0%)、チ
タン、コバルト、鉄、炭素、銅）
2) 形状：下図のとおり

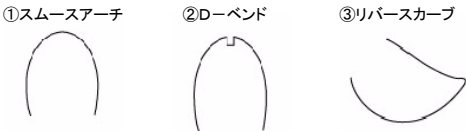

ワイヤーサイズ	①上顎/下顎	②上顎/下顎	③上顎/下顎
.010" (0.254mm)	NT-599/NT-600		
.012" (0.305mm)	NT-601/NT-602		
.014" (0.356mm)	NT-603/NT-604	NT-901/NT-902	
.016" (0.406mm)	NT-605/NT-606	NT-903/NT-904	NT-701/NT-702
.018" (0.457mm)	NT-607/NT-608	NT-905/NT-906	NT-703/NT-704
.020" (0.508mm)	NT-609/NT-610		
.016"x.016" (0.406 × 0.406mm)	NT-651/NT-652		
.016"x.022" (0.406 × 0.599mm)	NT-653/NT-654		NT-751/NT-752
.017"x.025" (0.432 × 0.635mm)	NT-659/NT-660		NT-753/NT-754
.018"x.018" (0.457 × 0.457mm)	NT-661/NT-662		
.018"x.025" (0.457 × 0.635mm)	NT-665/NT-666		
.019"x.025" (0.483 × 0.635mm)	NT-667/NT-668		NT-755/NT-756
.020"x.020" (0.508 × 0.508mm)	NT-673/NT-674		

- 3) 原理：歯牙の位置を移動するためにブラケットに装着し、
歯牙に圧力を加える器具である。

【使用目的又は効果】

歯の移動又は維持のために歯に力を加える。

【性能及び安全性に関する規格】

項目	仕様
引張り強さ	980 Mpa 以上
伸び	1% 以上
耐食性	溶出量 100 ppm 以下
ニッケル溶出	1.0 mg/cm ² 未満
変態点 (A f 点)	-25℃～5℃

【使用方法】

本品は、原則的には主線としてブラケットのアーチワイヤ
ースロットに装着して使用します。また、部分的な歯牙移
動のために、短く切断して使用することもあります。超弾
性で形状記憶性を有するため、不正歯列のレベリングに特
に適しています。

【使用上の注意】*

- 1) 使用注意
- ① 本品は、無理な角度、過度の加圧での使用は避けるこ
と。
 - ② 本品に損傷・変形（錆、表面キズ、曲がり又は汚染）
等がある場合には、使用しないこと。
 - ③ 本品の使用に際しては、手指等の裂傷等に十分に注意
すること。
 - ④ 本品の屈曲に屈曲器具の使用に際しては、プライヤー
等の製造業者の説明に従うこと。
- 2) 不具合・有害事象
- 本品の使用に伴い、掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎など
の歯科金属疹（遅発性金属アレルギー疾患）を発症する
ことがあります。

【保管方法及び有効期間】

- 1) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物
理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- 2) 歯科従事者以外が触れないように、適切に保管・管理す
ること。

【包装】

1 袋 1 0 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】*

製造販売業者：株式会社オーラルケア
製造業者：アクメモノコ社（米国）
Acme-Monaco Corporation