

単回使用

ホワイトポスト

【禁忌・禁止】


下記の症例患者には適用しないこと

- 本品が直線的に装着できない症例
- 残存歯質の全周に渡る歯冠部高径 1mm 未満の症例
- 本品は単回使用の為、再使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

名称	寸法	形状
ホワイトポスト 1.1mm	x:0.7 y:1.1	別図 (a)
ホワイトポスト 1.3mm	x:0.9 y:1.3	別図 (b)
ホワイトポスト 1.5mm	x:1.1 y:1.5	別図 (b)
ホワイトポスト ピン	x:0.5 y:1.3	別図 (c)

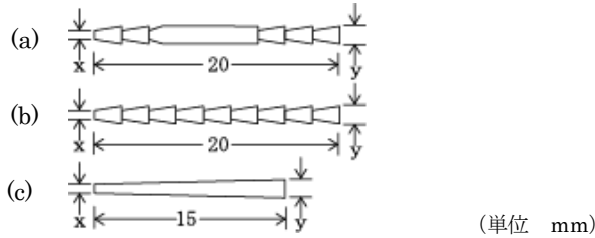

*2. 主な原材料

グラスファイバー / ビスフェノール A 型エポキシ樹脂等

【使用目的又は効果】

適切に根管充填された歯牙に対し、レジンによる支台築造を行う際、補強又は維持の為に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 本品は未滅菌製品であるため、使用前にアルコール等により軽く清拭し消毒ののち使用する。
- 本品は歯肉縁上に 1mm 以上の高さの健全な歯質を有する歯牙に適応可能である。
- 本品を直線的に装着できない湾曲した歯牙には適応しない。直線的に装着形成された部分にのみ適応する。

2. 操作方法

- 1) 通法に従い適切な根管処置を行い、X 線写真により根管の形状、長さを確認します。
- 2) ゲイツドリル、ピーソリマ等を用いて根管の形成を行います。必要ならば X 線写真にて深さの測定、確認を行います。
- 3) 軟化歯牙を残さない様、根面の形成を行ったのち、根管清掃ブラシ等で切削片等を除き、水洗、乾燥を行います。
- 4) ホワイトポストを試適し、設定した長さまで到達していることを確認します。(ポストメジャー届出番号: 27B2X00064000018 の使用も有効です。)
- 5) 試適したホワイトポストを適切な長さに切断します。
- 6) アルコールワットでホワイトポストを軽く拭き、エアブローで十分乾燥させます。
- 7) シランカップリング剤を塗布し、ホワイトポストの表面処理をします。
- 8) 通法に従いポスト孔の処理を行います。(使用するレジンセメントに記載されている使用方法に従って下さい)
- 9) デュアルキュア型のレジンセメントを根管内に塗布し、ホワイトポストにも同セメントを塗布し、根管に挿入します。(この際レントロを使用すると、レジンセメントの硬化が早まり操作時間が極端に短くなるのでご注意ください)

- 10) 光照射をし、重合が完了するまで待ち、重合を確認します。
- 11) コア築盛材を使用方法的通りに用い歯冠部を築盛します。
- 12) 通法に従い支台歯形成をします。

【使用上の注意】

- 本品は記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 本品は単回使用の為、再使用はしないこと。
- 誤飲防止又防湿の為、必要場合はラバーダムを装着すること。
- 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 光照射を行う際は、照射器の直射を避け保護メガネ等を着用すること。
- ドリルによる根管形成に際してはメーカーの指示に従い、最大の注意を払って使用すること。
- 本品の使用により発疹等の過敏症状が発現した患者には使用を中止し、医師の診療を受けさせること。
- 本品の切削作業などの際には防塵マスク等を使用し、粉塵による人体への影響を避けるよう努めること。
- 本品が目的とする根管以外に触れぬようピンセット等で把持し取り扱うこと。
- 本品はオートクレーブや加熱による滅菌はできません。アルコール等薬液により消毒し使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 本品は、多湿、直射日光等を避けて、常温にて保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

<有効期間>

製造日から 3 年。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

有限会社 デントレード
TEL : 072-620-0523

<外国製造業者>

アンジェラス社
Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A
(国名: ブラジル)