


機械器具 02 医療用照明器
一般医療機器 汎用光源 32037000

ポンドライトスクリューON タイプ ポンドライトアイガードタイプ


【形状・構造及び原理等】*

1) 形状・構造

スクリューON タイプ

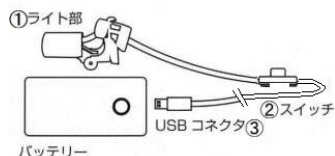

アイガードタイプ

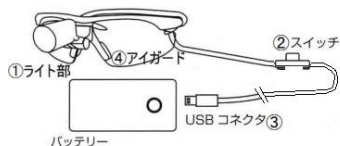

2) 原理

LED をバッテリー電源で点灯させる。LED の光は、患部を集中的に照らすようにレンズによって集光されるようになっている。

【使用目的又は効果】

医師が診療を行う際、治療部を照らすための照明器具。

【使用方法等】

1. スクリューON タイプの場合は前もって眼鏡にライト部を取付ける。
2. USB コネクタをバッテリーに接続する。
3. バッテリーに電源がある場合(負荷を接続したときに自動的に電源がONになるタイプでない場合)は、バッテリーの電源をONにする。
4. 本製品のスイッチの電源をONにする。
5. 光量の調節はスイッチを長押しし、ライトが2度点滅すれば設定モードになるので、スイッチを再度押す。何度か押すことにより、5段階で明るい→暗い→明るいを繰り返すので、希望の明るさでスイッチを再度長押しすることにより、光量が決まる。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 本機は防水ではないため、浸水させないこと [故障のおそれ]。
- ・ 5V 以外のバッテリーを使用しないこと[故障のおそれ]。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- ・ 通常の室温(10℃～35℃)で保管すること。
10℃以下の環境では電池の消耗が激しくなるので注意。
- ・ 水のかからない場所に保管すること。
- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより、悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。

2) 耐用期間

- ・ 製造の日から、正規の保守点検(消耗部品の交換)を行った場合に限り、7年間[自己検証(当社データ)による]とする。

【保守・点検に係る事項】

1) 清掃、滅菌について

- ・ 表面を中性洗剤または消毒用アルコール等でふき取る。
(他の有機溶剤は使用しないこと)

2) 使用者による保守点検事項(使用前)

- ・ 電源ボタンを押したときにLEDインジケータが緑色に点滅することを確認する。
- ・ アイガードのレンズ部分に破損や汚れがないか目視で確認し、異常があれば交換を業者に依頼する。

3) 業者による保守点検事項

- ・ その他異常がある場合は、点検整備を販売店または弊社にご依頼ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】**

製造販売業者: 有限会社デンタルテクニカ
〒567-0881 大阪府茨木市上中条1-1-37
TEL: 072-621-0884 / FAX: 072-621-0844
www.dentaltechnica.com / info@dentaltechnica.com

製造業者: 有限会社デンタルテクニカ