

器 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管
一般医療機器 X 線管支持床支持台（37076000）


特定保守管理医療機器／設置管理医療機器 デキシコ 在宅架台

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本装置は、本体と付属品で構成されます。

(1) 本体

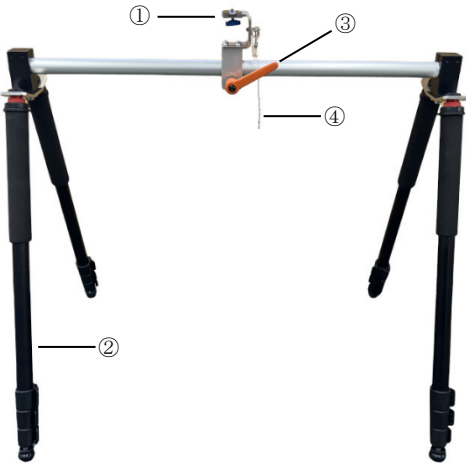

番号	名称	機能
①	雲台	診断用 X 線装置の固定
②	脚	診断用 X 線装置の高さ調整
③	調整レバー	診断用 X 線装置の角度調整
④	落下防止ワイヤー	診断用 X 線装置の落下防止

収縮時の外形寸法：

幅：710 (mm)
長さ：500 (mm)
高さ：656 (mm)
(1600 (mm) 迄調整可)
質量：約 2.8kg
耐荷重：5kg 以下

(2) 付属品

・専用バッグ



2. 原理

診断用 X 線装置の保持、位置調整の機能を有する。

3. 動作保証条件

周囲温度：5 ～ 40℃
相対湿度：20 ～ 80%（結露のないこと）
気圧：700 ～ 1060 hPa

【使用目的又は効果】

本装置は、診断用 X 線装置の保持、位置調整のために使用する構造を形成している可動式支持台である。

【使用方法等】

1. 使用前の準備
 - (1) 周囲の安全を確認し、水平な場所で専用バッグを開封する。
 - (2) 専用バッグから装置一式を取り出し、脚を赤ネジ部に取り付け固定する。
 - (3) 必要に応じて、脚を伸ばして固定する。
 - (4) 診断用 X 線装置と雲台の向きを確認しながら、雲台に診断用 X 線装置を取り付けて青ネジを回して固定する。
 - (5) 診断用 X 線装置に、落下防止ワイヤーを通して雲台に取り付ける。
2. 使用中の操作
 - (1) 診断用 X 線装置を装着した装置一式を、撮影に適切な位置に移動する。
 - (2) 調整レバー・脚を操作して、X 線照射位置を調整し、固定する。
3. 使用後の処置
 - (1) 使用前の準備で行った逆の手順により分解し、専用バッグに収納する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。
- ・装置に大きな衝撃や振動を与えないこと。
- ・診断用 X 線装置を雲台に取り付ける際、落下等の衝撃を与えることがないように、確実に取り付けを行うこと。
- ・装置の移動及び可動部分の操作は、周囲の物や人との接触、干渉、及び転倒などに十分注意しながら慎重に行うこと。
- ・汚れが付着した場合は、消毒用エタノールを含ませたガーゼ等で拭き取り、よく乾かすこと。

＜妊婦・産婦、授乳婦及び小児等への適応＞

妊婦、妊娠の可能性のある者、授乳中の者、及び小児への使用は、医師の判断のもとで慎重に行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管条件

周囲温度：5 ～ 40℃
相対湿度：20 ～ 80%（結露のないこと）
気圧：700 ～ 1060 hPa

- ・直射日光、紫外線のあたるところ及び高温多湿のところを避けて、清潔な場所に保管すること。
- ・可燃性及び爆発性の気体を使用する場所で保管しないこと。
- ・変形や損傷の原因となりうる硬いものへの接触や衝撃を避けること。

耐用期間：5 年〔自己認証（当社データ）による〕

使用上の注意を守り標準的な頻度で使用され、指定された保守点検を実施した場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検（日常点検）＞

1. 目視による点検
 - (1) 外観の確認
装置の外観に異常がないことを確認すること。
 - ・本体及び付属品に損傷や摩耗がないことを確認すること。
 - (2) 清浄性の確認
清浄な状態であることを確認すること。
 - ・本体及び付属品に、血液等の汚れ、異物付着がなく、清浄な状態であることを確認すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

(3) 装置周辺の確認

装置の妨げになる物がないこと。

2. 機能の確認

(1) 装置の正常状態の確認

装置の正常状態・正常動作を確認すること。

- ・可動部の動作
- ・異音、異臭がないことを確認すること。

(2) 装置の固定状態の確認

- ・装置本体及び付属品と診断用X線装置との取り付けに、問題がないことを確認すること。

(3) 安全性の確認

- ・所定の安全機能が正常であることを確認すること。

詳細は取扱説明書を参照すること。

<業者による保守点検>

12 ヶ月ごとの定期点検を弊社または弊社の指定する業者に依頼すること。

詳細は取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：デキシコウインジャパン株式会社

住所：兵庫県神戸市中央区港島南町 5-5-2

電話：078-304-5311

製造業者：デキシコウイン（大韓民国）

DEXCOWIN Co., Ltd.

取扱説明書を必ずご参照ください。