

機械器具 (32) 医療用吸引器

一般医療機器 吸引器用ボトル (38476000)

吸引ボトルセット

【警告】

- 初めての使用や長期間保管後の使用のときは、使用前に清掃・消毒をすること。[交差感染]
- 使用後は、使用品を清掃・消毒をすること。[交差感染]
- 吸引ボトルの中間レベル以上に吸引物を溜めないこと。

【禁忌・禁止】

併用禁忌


本品に取り付ける吸引器は、以下の製品以外を使用しないこと。

- 販売名：ELENOA エレノア
- 一般的名称：電動式可搬型吸引器
- 認証番号：227AKBZX00011000
- 製造販売業者：株式会社 T R アンド K

【形状・構造及び原理】

1. 外観図

(寸法単位：mm、公差：±5%)

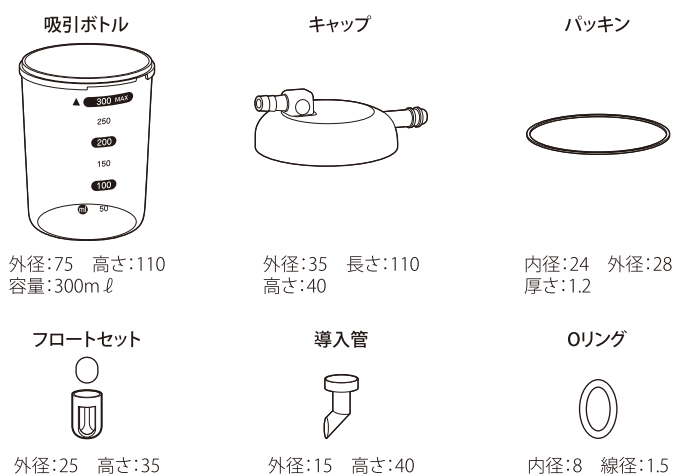

2. 構成

本品は以下の部品により構成される。

番号	名称	数量	原材料
1	吸引ボトル	1	ポリカーボネート樹脂
2	キャップ	1	ABS 樹脂
3	パッキン	1	シリコンゴム
4	フロートセット	1	ABS 樹脂
5	導入管	1	シリコンゴム
6	Oリング	2	シリコンゴム

備考：①構成品はセット又は単品でも販売される。
② Oリングの単品販売は、数量 5 個となります。

3. 動作原理

＜動作原理＞

本体の吸引ポンプにより陰圧を発生させ、吸引ボトルに接続された吸引ホースから吸引チップを経由して鼻腔内の鼻水を吸引する。吸引された鼻水は、導入管を経て吸引ボトルに貯留される。吸引された鼻水が一定量を超過すると、フロートセットが自動的に吸引圧力を遮断し吸引が停止される。陰圧に吸引された空気は吸引ボトルから本体に吸引され、大気中に放出される。

【使用目的、効果又は効能】

ガラス又はプラスチック製で、トップ又はふたによって密閉でき、体液の回収のために吸引器とともに使用する用具をいう。本品は再使用可能である。

【使用方法】

- 使用方法
 - 吸引ボトルセットを組み立てる。
 - 本体（販売名：ELENOA エレノア）に接続する。
 - ホース接続口に吸引ホースを接続する。
 - 吸引ホースの先端に吸引チップセットを装着する。
 - 本体の電源を入れ吸引する。
 - 吸引物の捨て方は、本体（販売名：ELENOA エレノア）の取扱説明書及び添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

- 使用前の注意
 - 使用前には吸引ボトルにひび割れや漏れがないことを確認すること。
- 使用中の注意
 - 吸引物が一定量を超えフロートセットが働いた場合には、速やかに電源を切断し、吸引ボトル内の吸引物を捨てること。
- 使用後の注意
 - 使い終わるたびに吸引ボトル内の鼻水を捨てること。

【保管方法及び有効期間】

- 保管方法
 - 水のかからない場所、高温・多湿でない場所。
 - 直射日光・ほこり・塩分・硫黄分などの他学薬品を含んだ空気・ガスなどにより悪影響の生ずるおそれのない場所。
 - 洗浄・消毒した構成品は、十分な水洗いと速やかな乾燥をさせてから保管する。
 - 振動、衝撃（運搬時を含む）などのない場所。

【保守・点検に係る事項】

- 使用者による保守点検事項
 - 割れ、ひび、バリや突起物の怪我のもとになる欠点の有無を確認する。
 - 汚れ、傷の有無や使用頻度に応じ、適切に交換する。

清掃・消毒

構成品	清掃	消毒
吸引ボトルセット	構成部品を分解し、浄水で希釈した中性洗剤溶液を含ませ拭く	取扱説明書を参照してください

※本体を滅菌しないこと。[高温・ガス・液体により故障の恐れ]

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 T R アンド K
住 所：東京都新宿区四谷 2-9 NK 第 7 ビル
TEL / FAX：03-6457-8751 / 03-6457-8752