

機械器具 32 医療用吸引器
 管理医療機器 一般的名称：電動式可搬型吸引器（JMDNコード：36616030）
電動鼻吸い器 S-80

【警告】

- 本製品および各部品は、必ずお子さまの手の届かないところに保管してください。[自分で作動させようとした場合、誤飲やケガなど思わぬ事故の原因となります。] 万一、誤飲した場合は、ただちに医師に相談してください。
- お子さまに鼻の病気がある場合には、本製品を使用する前に医師に相談してから使用してください。
- 使用中に出血したり、お子さまが痛がる場合には、すぐに使用をやめ、ただちに医師に相談してください。[鼻孔内の粘膜を痛めたり鼻腔炎をおこします。]
- 複数のかたが使用する場合は、その都度、吸引ノズルを新しいものと交換するか、洗浄し、消毒または除菌してから使用してください。[感染症の危険があります。]
- 本体から煙が出たり、異臭、異音がする場合は、すぐに使用を中止してコンシューマプラザまでお問い合わせください。
- 分解、修理、改造は行わないでください。

【禁忌・禁止】

<使用方法>


本書に記載されている使用目的以外で使用しないでください。

<併用医療機器>

- 1) MRI 検査を行う際は本品を検査室に持ち込まないこと。
[MR 装置への吸着や、火傷等のおそれがあるため。]
- 2) 高気圧酸素治療装置に本品を持ち込まないこと。
[誤作動や破損、爆発のおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・型式

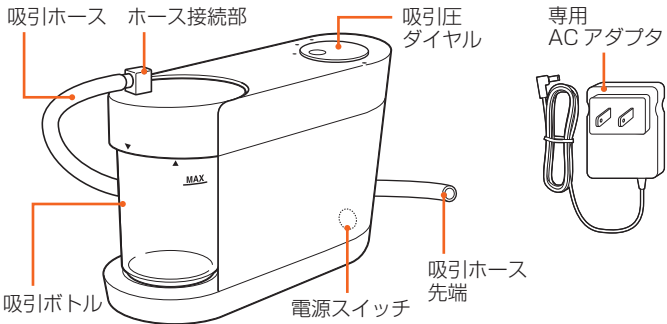

2. 定格

定 格：100V～50Hz/60Hz 29VA
 （専用 AC アダプタ：SINGOF-18U-1215B）
 電撃に対する保護形式の分類：クラスⅡ 機器
 電撃に対する保護の程度による分類：B 形装着部

- ** EMC：JIS T 0601-1-2：2018 に適合
 最大吸引圧力：-80kPa±10%
 排気流量：15L/min±20%
 容器内破耐久性：-95kPa
 ホースの耐圧性：つぶれ度は 0.5 未満

3. 作動・動作原理

本体内の吸引ポンプにより、吸引圧を発生させ吸引ノズル・吸引ホースを経て、吸引ボトルの槽内に鼻水を貯留させる。
 吸引圧は吸引圧ダイヤルにより強・中・弱を無段階に調整できる。
 吸引ボトルにはフロートが設置され、貯留水位がフロート位置まで上昇すると、吸引管をフロートが塞ぎ、溢れおよび機器内部へ吸い込みを防ぐ。

【使用目的又は効果】

家庭内の新生児及び乳幼児の鼻腔内の鼻水の吸引に使用する。

【使用方法等】

1. 使用準備

- 1) 本体の電源スイッチが OFF で、吸引圧ダイヤルが最少であることを確認する。
- 2) 専用 AC アダプタのプラグを本体の DC ジャックに接続し、AC アダプタの電源プラグをコンセントに差し込む。
- 3) 吸引ホースの片端を本体のホース接続口に接続する。
- 4) 吸引ノズルを吸引コネクターに接続し、吸引コネクターの片端を吸引ホースに接続する。

2. 吸引

- 1) 本体の電源を ON にする（吸引ポンプが作動）。
- 2) 別途用意した清潔な水に吸引ノズルを入れ、吸引ノズルを濡らす。
- 3) 吸引ノズルをお子さまの鼻孔に装着し、吸引圧力を低圧から調整しながら鼻水を吸引する。

3. 清掃・消毒

- 1) 本体の電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜く。
- 2) 吸引ホースを本体のホース接続口からはずし、吸引ボトルを本体からはずす。
- 3) 吸引ボトルのキャップを回してはずす。
- 4) 吸引ボトル内の吸引物を捨てる。
- 5) 吸引ノズル、吸引コネクター、吸引ホース、吸引ボトル、吸引ボトルキャップを水洗いし、消毒および乾燥を行い、収容する。

4. 組み合わせて使用可能な吸引ノズルセット

医療機器製造販売届出番号：13B2X10091000008
 販売名：吸引ノズルセットが使用できる。

* 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 併用医療機器：吸引ノズルセットの添付文書も併せて参照すること。
- 本書で記載されている以外の方法で使用しないこと。（予期できない動作をするおそれがある）
- 吸引ボトルのパッキンおよびフロートセットを必ず吸引ボトルキャップに取り付けて使用すること。
- ** ●可燃性ガス雰囲気内で使用しないでください。
[爆発又は火災を起こす恐れがあるため。]
- ** ●本器と他の機器を密着させたり、近づけて使用しないでください。
[互いに、電磁障害を引き起す恐れがあるため。]
- ** ●携帯電話等移動無線周波数通信機器により本器は影響を受けることがあるため 30cm 以上離してください。
- ** ●本器の付属品、および本器の別売品以外は使用しないでください。
[電磁障害を引き起す恐れや正常に作動しない恐れがあるため。]

【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所、気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などの化学薬品を含んだ空気・ガスなどにより悪影響の生じるおそれのない場所に設置、保管すること。
- 洗浄・消毒した構成部品は、十分な水洗いと速やかな乾燥をさせてから保管すること。
- 傾斜・振動・衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意して置き、落下させないこと。

【保守・点検に係る事項】

清掃・消毒

機械品	清掃	消毒
吸引ホース	内部 中性洗剤が希釈された清潔な水溶液を内部に通す。	次亜塩素酸ナトリウム
	外部 中性洗剤が希釈された清潔な水溶液を含ませ拭く。	次亜塩素酸ナトリウムを含ませ拭く。
吸引ボトル 本体	中性洗剤が希釈された清潔な水を含ませ拭く。	取扱説明書をご参照ください。

使用者による保守点検事項_本品の取扱説明書をご参照ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 TR アンド K
 〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-9 NK 第 7 ビル
 TEL：03-6457-8751 FAX：03-6457-8752
 製造業者：株式会社 八森電子デバイス
 〒018-2643 秋田県山本郡八峰町八森字家の上 166-2
 発売元：コンビニ株式会社
 コンシューマプラザ（Customer Service Center）
 住所：〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田 271
 TEL：048-797-1000 FAX：048-798-6109
 受付時間：9:30 ～ 17:00（土日祝日、年末年始を除く）