

器 32 医療用吸引器
管理医療機器 電動式可搬型吸引器 (JMDNコード:36616030)


電動鼻水吸引器 SS-19

【禁忌・禁止】

- ・ご使用前に、本書及び取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ・本書に記載されている使用目的以外で使用しないでください。
- ・初めての使用、または長期間保管後にご使用になる場合は、吸引器洗浄可能部品を洗浄してから使用してください。
- ・ご使用の際は3秒～5秒を目安に吸引してください。
- ・お子様に鼻の病気がある場合には使用する前に医師に相談してください。
- ・使用中に出血や、お子様が痛がる場合には直ちに使用をやめてください。
- * 複数の方が使用する場合は、その都度吸引ノズルを新しいものと交換するか、洗浄、消毒、または除菌してから使用してください。
- ・ご使用後は必ず取扱説明書に従って洗浄し、乾燥させた上で、清潔な場所に保管してください。
- ・乳児の手の届かないところに保管してください。
- ・分解、修理、改造などを行わないでください。
- * 高気圧酸素治療装置内では使用できません。
- * 可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素雰囲気内では使用できません。
- * 磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)付近では使用できません。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・寸法

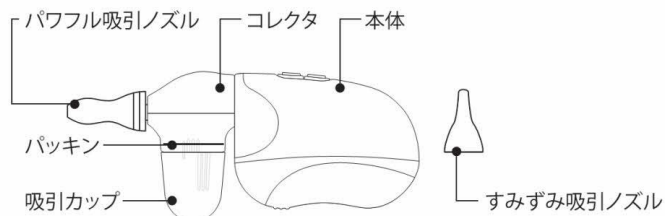

外形寸法・質量

寸法:長さ154mm、幅42mm、高さ70mm
質量:約137g(電池別)

2. 原材料

- ・本体、コレクタ:ABS樹脂
- ・吸引カップ:ポリカーボネート樹脂
- ・吸引ノズル:シリコンゴム
- すみずみ吸引ノズル パワフル吸引ノズル



3. 電気的定格

定格電圧:DC3.0V

電 源:単3形アルカリ電池(2個)

機器の分類

- ・電撃に対する保護の形式:内部電源機器
- ・電撃に対する保護の程度: B F 形装着部

4. EMC規格:本製品はEMC規格JIS T 0601-1-2:2012に適合しています。

5. 作動原理

電動モータで動作するポンプにより、吸引口から排出口への流体の流れを作り出す。この流れにより患者鼻孔にあてた吸引ノズルにより鼻水を吸引する。

【使用目的又は効果】

家庭における、新生児及び乳幼児の鼻腔内の鼻水の吸引に使用する。

【使用方法等】

1. 使用準備

- ①電池カバーをはずし、バッテリーケース内側の＋極表示に従って単3形アルカリ電池を2個挿入する。その後電池カバーを取り付ける。
- ②吸引ノズルを用途ごとに使い分けて選び吸引接続口に装着する。

2. 使用

- ①本体を持ち、ボタン強または弱を押したまま作動させる。
- ②吸引ノズルを鼻孔にやさしく当てて鼻水を吸引する。

3. 使用後

- ①本体の電源スイッチをオフにする。
- ②本体からコレクタ、吸引カップを取り外し、吸引カップ内に溜まった鼻水を廃棄した後、コレクタ、吸引カップ、吸引ノズルをよく洗浄し、乾燥させる。

【使用上の注意】

- * 陰圧で鼓膜がアンバランスになるのを防止するため、お子様が息を止めていたり唾液を飲み込んでいる様子の時は、ノズルを鼻孔に当てないでください。
- * 本製品は必ず大人の方が操作してください。また、吸引するときは安定した姿勢で使用してください。
- * 本製品の使用中、吸引力またはポンプの音が弱くなってきた時は、新しい電池と交換してください。
- * 本製品を使用中、本体より煙が出たり異音・異臭が発生した場合は、直ちに使用を中止し、販売業者または製造販売業者に点検を依頼してください。
- * 本製品を長時間使用しないときは、電池を取り外してください。
- * 使用する際は、必ず使用前点検を実施してください。
- * 本製品を落下させないでください。故障の原因となります。
- * 本体をオートクレーブ滅菌しないでください。故障の原因となります。
- * 本製品を1回の吸引操作につき、連続して5秒以上使用しないでください。故障の原因となります。
- * 吸引ノズルの先端を鼻腔内の粘膜に直接押し当ててふさぐことがないようにしてください。吸引力が上昇して危険です。
- * 本製品は鼻腔内以外に使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

使用環境条件:周囲温度:16℃～35℃

保管環境条件:周囲温度:-25℃～55℃ 相対湿度:0～85%(ただし結露なきこと)

耐用期間:3年(自己認証、製造元データによる)

大気圧:700～1060hpa

【保守・点検に係る事項】

- ・「取扱説明書」をよく読み理解したうえで、正しく安全に洗浄・消毒してください。
- ・長期間の保管後はご使用前に動作確認をしてください。また本製品に洗浄剤が残っていないことを確認してから使用してください。
- ・キズ、腐食、汚れがないことを定期的に確認してください。
- ・故障した場合は、修理や分解をせず、販売店または販売元に連絡してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■ 製造販売業者

株式会社 TRアンドK
〒160-0004 東京都新宿区四谷2丁目9番NK第7ビル
TEL:03-6457-8751 FAX:03-6457-8752

■ 製造業者

AVITA (WUJIANG) Co., Ltd
中華人民共和国 CHINA

必ず取扱説明書をご参照ください