

オンブ メディカル

再使用禁止

【警告】

1. 本品の使用により、体質・体調等によっては、トキシックショック症候群（Toxic Shock Syndrome：TSS）が発生する可能性があります。
次のことを必ず守ってください。
 - ・手指を清潔にしてから本品を使用してください。
 - ・個別包装は使用直前に開封し、使用前に破れがあったものは使用しないでください
2. 以下の症状が発生した場合は、直ちに産婦人科などの専門医にご相談ください。
 - ・突然の高熱、発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血、血圧低下など。

※TSS とは：黄色ブドウ球菌の産出する毒素が原因で起こる急性疾患です。黄色ブドウ球菌は鼻腔・皮膚・頭髮・脇の下・陰毛・膣等にも存在し、本品の使用の有無に関係なく、切り傷や火傷等によっても発症する可能性があります。ごくまれに死に至る重篤な症状を引き起こす可能性もあります。使用に際しては、手指が清潔でなかったり、本品を再使用したりすることによって、黄色ブドウ球菌が増殖し、毒素を産生しやすくなる可能性があります。この文書に従って使用することで、TSS 発症の可能性を軽減することができると考えられます。

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. 過去にトキシックショック症候群（TSS）を発症したことがある人は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

<概要>

本品は、膣内に挿入し、シリンジ内の洗浄液をピストンを押すことによって膣腔に流入させる。

<本体形状>

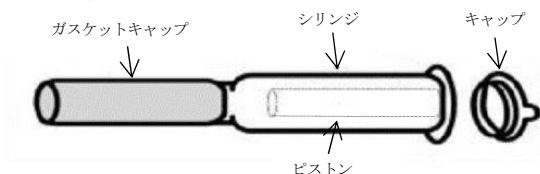

体に接触する部分の原材料

本体（ピストン以外）：ポリプロピレン

ピストン：ポリエチレン

*洗浄液：水、プロパンジオール、ヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール、乳酸Na、乳酸、BG、チャ葉エキス、ヒアルロン酸Na（乳酸桿菌入りタイプもある）

<原理>

ピストンを押すことによってシリンジ内の洗浄液を膣腔に流入させることができる。

【使用目的又は効果】

本品は膣の洗浄に用いる。

【使用方法等】

- (1) 手指を洗浄し清潔にした後、個別包装の上端を切り取り線に沿って開く。
- (2) 本体を取り出し、底のキャップを外し、先端のガスケットキャップを外し、反対の底に差込みます。
- (3) 楽な姿勢でシリンジの先端から約 5cm を膣内に挿入します。
- (4) ピストンをゆっくりと押し、洗浄液を注入します。
- (5) 本体をゆっくりと取り出す。
- (6) 洗浄液は膣口からゆっくりと体外に排出されます。
- (7) 使用後は、洗浄液で下着が汚れないように、ナプキンなどを使用してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
- (1) 本品のご使用前に、本書及び取扱説明書を必ずお読みの上、ご使用ください。
- (2) 次の人は使用前に医師に相談すること。
 - ・局部に炎症、その他異常がある方
 - ・妊娠中または妊娠の可能性がある方
 - ・特定の病気の予防／治療に関して、医師の治療を受けている方
- (3) 避妊効果はない。避妊フィルム等の殺精子剤を使用した後にお使いになると、避妊効果がなくなることがあるので本品の使用をやめること。
- (4) ご使用中、ご使用後に万一異常を感じた場合、また過剰に使用して異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し医師に相談すること。
- (5) 15 才未満の小児、認知症の方には使用させないこと。
- (6) 1 日 1 本を目安に使用し、過剰な使用は控えること。
- (7) 本品を膣に挿入する際は、本書及び取扱説明書の「使用方法」を読みながら、粘膜等の部位を傷つけないように楽な姿勢で、無理な力をかけないで挿入すること。
- (8) 必ずガスケットキャップを外して使用すること。ガスケットキャップをしたまま膣に挿入すると傷つく恐れがある。
- (9) 手や衣服についての洗浄液は水で洗い流すこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

保管の際には、曲げたり重い物の下に置いたりせず、また水濡れに注意し、高温、高湿、直射日光を避けてください。

<有効期間>

使用期限は個装箱に記載〔自己認証（当社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者：株式会社ディーエムピー

電話番号：03-6841-0006

*総販売元：株式会社ジェイディビーネットワーク

東京都板橋区高島平 9-16-3

☎ 0120-402-901

URL：https://onpeut.com