

プリマ キャスト

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 医療目的以外に使用しないこと
3. 損傷部位に直接接触させないこと
(樹脂の付着、皮膚のかぶれがあるため)
4. 25℃以上の水は使用しないこと

水温が高いほど、本品に使用されている樹脂の硬化時の発熱が高くなり、熱傷を起こす恐れがあるため

【形状・構造及び原理】

<鳥瞰図>

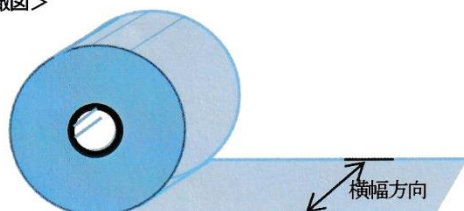

<寸法>

生地の色 W:白色 G:緑色

形式番号	寸法 (横幅 x 縦の長さ)	巻 / 箱
PC 100W PC 100G	1 インチ x 180 センチメートル	10
PC 200W PC 200G	2 インチ x 360 センチメートル	10
PC 300W PC 300G	3 インチ x 360 センチメートル	10
PC 400W PC 400G	4 インチ x 360 センチメートル	10
PC 500W PC 500G	5 インチ x 360 センチメートル	10

<形状>

本品は、樹脂を浸み込ませたガラス繊維の包帯状のもの(キャスト)を丸めて1巻ごと防湿袋(アルミニウム製)に包装されている。

<原理>

本品は、ガラス繊維に含浸してある樹脂が水と反応して硬化し、患部を固定・保護する。

【使用目的、効能又は効果】

本品はプラスチックとガラス繊維からなる包帯状のもの(キャスト)であり、身体の骨折、疾患又は疼痛のある捻挫等の損傷部位で、動きやすい処を固定するために用いる包帯である。

この目的に沿って損傷部位がしっかり固定されて、患部に余分な負担を掛けることは無くなり、損傷部位の回復に必要な役割を果たす。

【操作方法又は使用方法等】

1. 施術準備

- ① 患部の範囲に適した幅及び長さのキャストを選ぶ
- ② 使用前に袋の上からキャストが柔らかいことを確認し、硬くなっている場合は使用しない。
- ③ あらかじめ、20℃前後の水を適当な大きさの容器に溜めておく。
- ④ ゴム手袋を着用して、袋からキャストを取り出す。

2. 施術開始

- ① キャストを巻き付ける長さより長めの筒状のストッキング及び包帯状のパッドで肌を保護するために、施術部位を覆う。
- ② 施術直前にキャストを防湿袋から取り出し、予め溜めておいた20℃前後の水に浸し、キャスト全体に隅々まで水がしみわたるようにする。
- ③ 水から取り出した後、タオルなどを用いて余分な水分を取り除く。
- ④ キャストを適度な強さで疾患部に、本品の幅の1/2から2/3くらい重ねながら巻付ける。
- ⑤ 巻き付けた後、手早くキャストが疾患部に適合する様に形を整える。
- ⑥ 室内環境により、およそ3分から4分で、キャストから手を放しても形状が保持される程度に硬化する。
- ⑦ 7分から10分で硬化し、疾患部を保護する強度を有する。

3. 取り外す場合

- ① 取り付けていたキャストを取り外す場合は、専用のギブスカッターやハサミ等を使用すること。
- ② 本品切断時には、カット時に生じるガラス繊維の粉末を吸入すると体内に蓄積し、呼吸器疾病を起こす危険があるため、必ずマスク等を着用すること。

【使用上の注意】

- ① 本品を装着中及び装着直後には、発熱を伴うので、患者が熱さを訴えた場合は、直ちに本品を外すこと。
- ② 本品使用中に皮膚障害と思われる症状が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- ③ 防湿袋を開封した時点から直ちに硬化が始まるので直ちに使用すること。
- ④ 未開封の本品を乱暴に取り扱わないこと。防湿袋に穴があき、空気中の湿気により、本品が硬化し、使用できなくなることがある。
- ⑤ ガラス繊維中の樹脂が偏るので、箱を縦積したり、防湿袋を立てて長期間保管しないこと。
- ⑥ 本品の露出した端の部分でケガをしないように十分に注意すること。
- ⑦ 本品を廃棄する際は、行政の定めた規則に従い、適切に処理すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

直射日光を避け、温度15℃～30℃、湿度60%以内で保管すること。

2. 使用期間

製造日より3年

(アルミニウム製の袋に貼ってあるラベルに記載)

【包装】

すべての幅のキャスト：一箱10巻入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社 TCC

〒113-0033 東京都文京区本郷3-31-6

電話:03-6801-8711 (代表)

製造業者

D&B 社 (国名：韓国)