


歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器 硬質レジン歯（70808000）
ハイカラ

* 【形状・構造及び原理等】

- * 1. 形状・構造（永久歯）
1) 前歯の形態・寸法（mm）

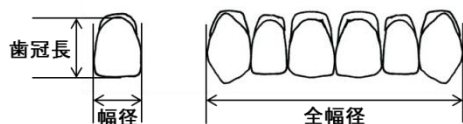

	形態番号	全幅径 (A)	中切歯幅径 (B)	中切歯歯冠長 (C)
上顎	4NO	44.4	8.2	11.2
	4GT	44.4	8.2	11.2
	5NO	47.2	8.7	11.9
	5GT	47.2	8.7	11.9
下顎	4NO	35.2	5.2	9.9
	4GT	35.2	5.2	9.9
	5NO	37.4	5.5	10.5
	5GT	37.4	5.5	10.5

（各寸法の有効誤差範囲は、各寸法の±5%以内とする。）

- 2) 臼歯の形態・寸法（mm）



	形態番号	片側全幅径 (D)	第一小臼歯長径 (E)	第一大臼歯長径 (F)	第一小臼歯舌側高さ (G)	第一大臼歯舌側高さ (H)
上顎	30NS	30.0	10.2	7.4	3.0	3.9
	30GT	30.0	9.1	7.3	2.4	2.7
下顎	30NS	32.0	9.8	7.4	3.4	3.4
	30GT	32.0	9.6	7.3	2.3	2.5

（各寸法の有効誤差範囲は、各寸法の±5%以内とする。）

- 3) 色調・形態

	部位	大きさ	形態	色調
上下顎	前歯部	4 5	NO（通常形） GT（薄型）	A1、A2、A3、A3.5、 A4、B3、C3
	臼歯部	30	NS（通常小型） GT（薄型）	

2. 成分分子

ポリメタクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、多官能性モノマー、その他

【使用目的又は効果】

本人工歯は義歯床用人工歯の前歯、臼歯である。

【使用方法等】

通常の義歯排列法により本品を排列し、義歯床用合成樹脂と結合させて使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 1) 本製品への研磨作業の際には、粉塵による人体への影を避ける為に、保護眼鏡、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用する。
- 2) 市販されている一部の強アルカリ性の石膏溶解剤、義歯洗浄剤を使用した場合の変色・退色を起こす可能性があるため使用しないこと。
- 3) 本品はアクリル系以外の材料（熱可塑性樹脂等）には接着しないので、アクリル系樹脂以外の床用樹脂を用いて義歯を作製する際には、その使用樹脂の取扱説明書に従うこと。また、射出型熱可塑性樹脂で射出成型する際にはその使用温度によって人工歯が変形する可能性があるため注意すること。
- 4) ろう義歯作製時に、火炎が人工歯部に長時間あたらないようにする。
- 5) 本製品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 6) 本製品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- 1) メタクリレート製品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本製品の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、痒み、しびれ等の過敏症状が現れた患者、又は術者は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法および有効期間等】

【保管方法】

歯科医療従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者・製造業者：株式会社 DentalBank
（第1種医療機器製造販売業）

住所：福岡県大野城市御笠川2丁目8番9号
電話番号：092-513-3280