

器 68 印象採得又は咬合採得用器具
 一般医療機器 歯科材料加温器 JMDN（医療機器コード）：70720000

てきおん君

【警告】

1. ボイリングするときは必ずフタを閉めること。
2. シリンジやカートリッジ式寒天印象材を取り出すとき、
又ラックを交換するときは、高温になっているので十分に注意すること。

【禁忌・禁止】

1. 本機器は発火性、引火性のある薬品の近くに設置しないこと。
2. 本機器は歯科用寒天コンディショナーです。
使用目的以外での使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】


1. 構造



④ 電源コード(付属品)


⑤ メインスイッチ

⑥ ヒューズホルダー

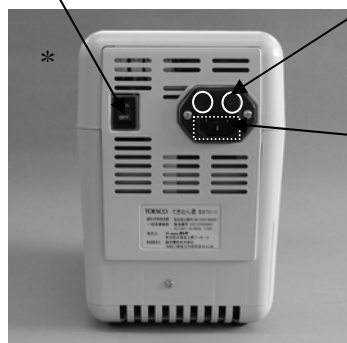

⑦ 電源コネクター


⑧ シリンジラック
(付属品)

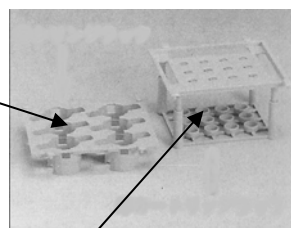

⑨ カートリッジラック
(付属品)

付属品：電源コード
 シリンジラック
 カートリッジラック

コントロールパネル

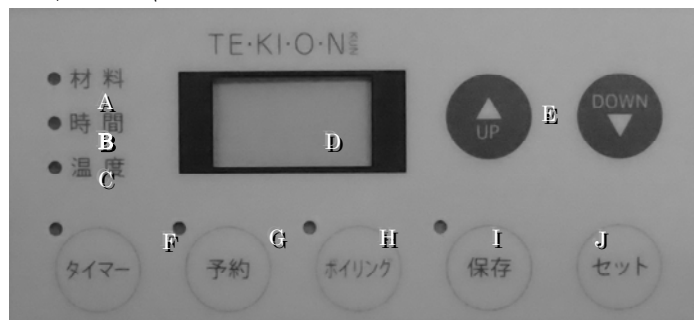

A. 材料（プログラム）モード・ランプ

B. 時間モード・ランプ

C. 温度モード・ランプ

D. 表示器

E. アップ/ダウン・スイッチ

F. お知らせタイマー・スイッチ

G. 予約タイマー・スイッチ

H. ボイリングスタート・スイッチ

I. 保存スタート・スイッチ

J. セット・スイッチ

2. 寸法

本体寸法 : 幅 143mm 奥行 220mm 高さ 211mm
 重量 : 1.8 k g

3. 電気的定格

電源 : AC100V 50/60Hz
 消費電力 : 170W
 使用ヒューズ : ミゼット型ヒューズ 125V 3A 2 個
 温度表示 : 2桁表示
 本製品は EMC 規格 JIS T 0601—1—2:2012,
 JIS T 0601—1:2012 + 追補 1:2014 に適合している。

4. 原理

本装置はヒーターで暖めた熱をファンで寒天槽に送り、寒天槽にセットされた歯科用寒天印象材のボイリング、保存を行うものである。

**【使用目的、又は効果】

歯科用寒天印象材等の材料を適切な使用状態に維持するために用いる加温装置。

**【使用方法等】

使用方法：詳細は使用説明書を参照すること。

◎固定プログラムには以下の表のとおり条件が設定されています。

プログラム番号	ボイリング時間	保存設定温度
0 (注1)	1～60分	30～80℃(注2)
1	12分	60℃
2	10分	60℃
3	12分	58℃
4	10分	58℃
5	12分	56℃
6	10分	56℃

注1：プログラム番号「0」はフリープログラム専用です。

注2：室温の高い夏期などに温度設定を30℃付近にした場合、コントロールできないことがあります。

使用説明書を必ず参照ください。

【使用上の注意】

1. 本装置を使用する場合の環境要件
 - ①温度、湿度調整が可能な場所。
 - ②室内の温度は10℃～40℃、相対湿度は45%～85%を保つこと。
2. 機器を設置するときは、次の事項に注意すること。
 - ①水のかからない所に設置すること。
 - ②気圧、温度、湿度、通風、日光、塵埃、塩分、硫黄分を含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に設置すること。
 - ③傾斜、振動、衝撃（運搬を含む）など安定状態に注意すること。
 - ④化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に設置しないこと。
3. 機器を使用するときは次の事項に注意すること。
 - ①スイッチの接触状況、すべてのコードの接続が正確で且つ完全であることを確認すること。
 - ②機器全般に異常の無いことを確認すること。
 - ③機器に異常が発見された場合は安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な処置を講ずること。
 - ④使用時には必ずシンリジラックまたはカートリッジラックのいずれか一方のみを装着すること。
 - ⑤室温の高い夏期などに保存設定温度を30℃付近にした場合、コントロールできないことがある。
 - ⑥停電等で作動中に電源が切れた場合は初期状態に戻る為、寒天印象材の状態にあわせて再度設定しなおすこと。
4. 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - ①予約タイマーご使用の際は、必ずメインスイッチを一度「OFF」してから再度メインスイッチを入れて、操作すること。
 - ②本製品は歯科用寒天印象材の溶解、保存以外の目的には使用しないこと。
 - ③機器は改造しないこと。
5. 保存状態から取り出し、使用、放置して温度が低下してしまった寒天印象材は再度ボイリングを行ってください。一度開封したカードリッジタイプの寒天印象材はボイリング中に水分が蒸発してしまい、使用にふさわしくない状態になってしまうことがあります。
6. 水平で安定したホコリの少ない場所に設置すること。
7. 直射日光、高温多湿の場所は裂けて設置すること。

**【保管方法及び有効期間等】

1. 保管場所については次の事項に注意すること
 - ①水のかからないところに保管すること。
 - ②気圧、温度、湿度、通風、日光、塵埃、塩分、硫黄分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
 - ③傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
 - ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
2. 耐用期間
正規の保守点検を行った場合に限り6年間とする。
（耐用期間は自己認証[当社データ]による）
ただし、付属品は消耗品であるので該当しない。

【保守・点検に係る事項】

**（使用者による保守点検事項）

詳細については使用説明書を参照のこと。

1. 暫く使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 本体の汚れは中性洗剤を含ませた布等で拭き取ること。
有機系溶剤（シンナー、ベンジン、アルコール等）は使用しないこと。
3. エラーが発生した場合には、勝手に機器を分解したりせず、必ず購入先のディーラーまたは㈱ヨシダ営業所へ相談すること。
4. 本体内部に消耗品（可動部）がありますので、5年を目途に整備すること。

エラー表示	異常箇所・対処
E1	寒天槽の蓋が開いています。 寒天槽の蓋を確認して、もう一度スタートさせてください。 再度、同一のエラーが起こる場合はヒーターに異常があります。
E2	センサーに異常があります。
E3	ファン、モーターに異常があります。
E4	ファン、モーター、センサーに異常があります。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 藤栄電気株式会社
神奈川県横浜市都筑区大丸26番地
TEL 045-941-6780
FAX 045-941-6779

発売元 株式会社 ヨシダ
東京都台東区上野7-6-9
お問い合わせ窓口
サポートセンター
TEL 03-6880-2155
FAX 03-3841-8204

使用説明書を必ずご参照ください。