

ハナコ・イリゲーションチューブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 1) 再使用・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品形状＜代表例＞

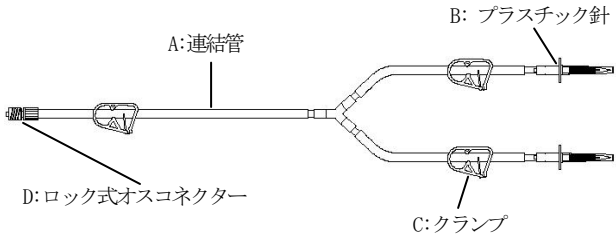

構成部品名と主な材質

構成部品	材 質
A:連結管	ポリ塩化ビニル
B:プラスチック針	ポリアセタール
C:クランプ	ポリアセタール又はポリプロピレン
D:ロック式オスコネクター	ポリカーボネート

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

【使用目的又は効果】

本品は、主に腹腔鏡下の手術又は外科的手術等において、液体バッグに接続し、腹腔内の洗浄又は術野の洗浄に用いる液体を導入する目的で使用する。また、滅菌済みであるためそのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

＜使用方法＞

- 1) 本品を包装内より汚染に十分注意しながら取り出し、破損等ないことを確認する。
- 2) クランプを操作しチューブを閉塞状態とし、プラスチック針挿入時の液体漏れを防ぐ。
- 3) 使用する液体バッグの栓部に針カバーを外したプラスチック針を確実に刺通す。
- 4) カバーを外したロック式オスコネクターを併用機器に確実に接続する。
- 5) 閉塞したクランプを解放し液体を導入する。
- 6) 導入後はクランプを閉塞し、液体漏れを防ぐ。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) プラスチック針の液体バック栓部への抜き差しはプラスチック針本体を持って行うこと。[プラスチック針からチューブが抜ける可能性がある。]
- 2) 本品を他の機器と接続する場合には、気泡の混入や液漏れの発生がないように確実に接続を行うこと。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出する恐れがある。
- 2) 脂肪乳剤及び潤滑剤を含む医薬品、ヒマシ油などの油性成分、界面活性剤又はアルコールなどの溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、ポリカーボネート樹脂製のコネクターのひび割れについて注意すること。
[薬液によりコネクターにひび割れが生じ、薬液漏れ、空気混入などの可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過

度な締め付け及び増し締めは、ひび割れの発生を助長する要因となる。]

- 3) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 4) プラスチック針の液体バック栓部への刺通時は、斜めに穿通したり、穿通中に横方向の力を加えないこと。[変形や破損が生じる可能性がある。]
- 5) プラスチック針の液体バック栓部への刺通時は、同一箇所を繰り返し穿通しないこと。[本品内へのゴム片の混入や破損が生じる可能性がある。]
- 6) チューブ及びチューブと接合している箇所は、過度に引っ張るような負荷やチューブを押し込むような負荷、チューブを折り曲げるような負荷を加えないこと。[チューブが破損する、又は接合部が外れる可能性がある。]
- 7) 本品の使用中は本品及び患者に異常のないことを監視すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法
 - ①包装に傷や破れが生じないように取り扱い及び保管に注意すること。
 - ②本品は高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所に保管すること。
- 2) 有効期間
 - 製品ラベル参照。
[自己認証(当社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ハナコメディカル株式会社
〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2-24-11
TEL 048-881-4001