

ディスポーザブル眼科用注射針

再使用禁止

【禁忌・禁止】


- ・再使用禁止
- ・針管の反復折り曲げを行わないこと
[針管が折れる場合があるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造


本品は針基と針管で構成され、一次包装はブリスター包装により無菌性が保持される。

＜構造図と各部の名称＞

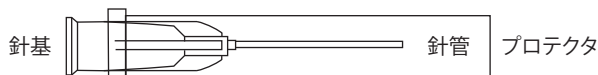

- ・針管外径 [0.9mmから0.3mm]
- ・針管長さ [10mmから50mm]
- ・針管材質 [ステンレス鋼SUS304]
- ・針基テーパー仕様 [ISO 594]
- ・針先形状[鈍角(刃面を有しない)]

＜代表的な曲げ加工例＞

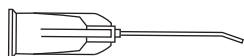

- ・先端曲げ角度 [0°から60°曲げ]

2. 原理

注射器のおすテーパー部に、本品針基のめすテーパー部を接合することで、灌流液などの注入及び眼内物質の吸引が行える。

【使用目的又は効果】

本品は、眼科手術時に灌流液などの注入及び眼内物質の吸引に使用する。

【使用方法等】

1. ブリスター包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品針基のめすテーパー部を、注射器のおすテーパー部に確実に接続します。
3. プロテクタをまっすぐ引いて外し、使用します。
[あらかじめ接合部に緩みがないことを確認してください。また、使用中は定期的に緩み、外れ、液漏れがないことを確認してください。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・針管に直接、手を触れないこと。[感染の可能性がある。]
- ・薬液を針管に長時間接触させないこと。[薬液が結晶化し、針管が詰まる、又は針管が腐食する可能性がある。]
- ・注射器に接続する際は、針基に過剰な回転負荷をかけないこと。
[針基が破損し、薬液が漏れる可能性がある。]
- ・使用後は針管には触れずに、感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。

2. 使用期間

箱の使用期限欄を参照してください。(自己認証(当社データ)による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： ＊＊エア・ウォーター・リアライズ株式会社

＊茨城県笠間市長兎路1320番地5

電話番号 0296-77-8649

製造業者： ＊＊エア・ウォーター・リアライズ株式会社

＜製品に関する問い合わせ＞

＊＊エア・ウォーター・リアライズ株式会社

フリーダイヤル:0120-305-765

(受付時間：平日午前9時～午後5時)

販売業者：株式会社エムエス

本社：東京都文京区本郷3丁目26番12号

TEL:03-3814-1026