

機械器具74 医薬品注入器
管理医療機器 単回使用注排用先丸針 30889012


J カニューレ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

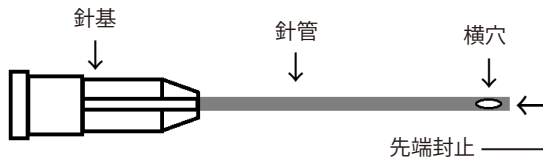

＜原材料＞

針管	ステンレス鋼
針基	ポリプロピレン、着色料

【使用目的又は効果】

医薬品等の薬液を皮内若しくは皮下に注入すること。

【使用方法等】

1. 必要に応じて、あらかじめ手袋を着用する。
2. 目的部位を消毒する。
3. 目的部位を本品より太いゲージの針管を持った穿刺針で穿刺、又はメス等で小切開し、本品を挿入する穴(エントリーポート)を設ける。
4. 本品を包装から取り出し、注射器(ロック式)等と確実に接続し、使用する。
(注意: 注射器等に装着する場合は、プロテクターを付けたまま接続する。)
5. プロテクターをまっすぐ引いて外す。
6. 目的部位に挿入し、薬液等を注入する。
7. 針を抜いたあと、必要な場合は止血を行う。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・プロテクターを外すとき、先端封止部分がプロテクターに触れないように注意すること。また、アンプル等の薬液容器側面に先端封止部分が当たらないように注意すること。
[針先が変形するおそれがある。]
- ・針管に、直接手を触れないこと。
[感染の可能性がある。]
- ・リキャップする必要がある場合は、針先がプロテクターや手に触れないように注意すること。
- ・注射器に接続する際は、プロテクターで針基に過剰な回転負荷をかけないこと。
[針基が破損し、薬液が漏れる可能性がある。]
- ・針管を曲げて使用したり、反復折り曲げをしないこと。
[針管が折れる場合がある。]
- ・薬液を針管に長時間接触させないこと。
[薬液が結晶化し、針管が詰まる、又は針管が腐食する可能性がある。]
- ・使用後は針管には触れずに、感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。
[感染のおそれがある。]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・あらかじめ接合部にゆるみがないことを確認してから使用すること。また、使用中は定期的に緩み、外れ、液漏れがないことを確認すること。
[接続部から液漏れなどが生じるおそれがある。]
- ・本品の接続に際して、過度の締め付け及び増し締め等には十分注意すること。
[接続部が破損するおそれがある。]
- ・接続部に薬液や血液等を付着させないこと。
[接続部の緩み等が生じるおそれがある。]

＜不具合・有害事象＞

- 1) その他の不具合
汚染、包装の損傷、空気混入、漏れ、曲がり、外れ、緩み、穴、折れ、亀裂、切断、詰まり
- 2) その他の有害事象
感染、出血

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、高温多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 有効期間
箱の使用期限を参照する。
(自己認証(当社データ)による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: *エア・ウォーター・リアライズ株式会社
茨城県笠間市長免路1320番地5
電話番号 0296-77-8649

製造業者: *エア・ウォーター・リアライズ株式会社

＜製品に関する問い合わせ＞

*エア・ウォーター・リアライズ株式会社
フリーダイヤル: 0120-305-765
(受付時間: 平日午前9時～午後5時)