

ライノウォッシュ

【警告】

- 薬液の種類、用量、用法については必ず医師、または薬剤師等の指導に従うこと。
- 初めて使用する時や、長期間使用しなかった時は、使用前に必ず滅菌等を行うこと。
- ライノウォッシュ本体、アウタージャケット等の部品は、使用者個人の物を使用すること。部品の共用は感染症等の原因になります。
- 使用後、残った薬液等はその都度廃棄し、使用毎に新しい薬液等を使用すること。
- 鼻洗浄が終わった後はすみやかに各部品を洗浄すること。洗浄後は十分に乾燥させてから清潔な場所で保管すること。
- 消毒剤で消毒した部品は、きれいな水ですすぎ洗いし、水気をよくきり、十分に乾燥させてから使用すること。
- ライノウォッシュの各部品は清潔な場所で保管すること。
- 故障等によりご使用になれない場合は、すぐに医師に相談すること。

【禁忌・禁止】

- ライノウォッシュの各部品は純正品以外を使用しないこと。
- 水道水での鼻洗浄はしないこと。
- 乳幼児やお子様の手の届くところには置かないこと。
- 最大容量(15mL)を超える薬液等を入れないこと。
- ライノウォッシュ本体等の各部品には無理な力を加えて変形させたり、ライノベンチュリーのノズル部分をピン等で突いたりしないこと。正しい鼻洗浄が行えなくなります。
- エアーコンプレッサー等器械本体や、ライノウォッシュ本体等の各部品は落としたり、強い衝撃を加えたりしないこと。
- ライノウォッシュに薬液等を入れたまま保管または携帯しないこと。
- ライノウォッシュの各部品の乾燥は自然乾燥させること。電子レンジや食器乾燥機、ヘアドライヤー等で乾燥させないこと。
- 煮沸消毒するときは、空焚きに注意すること。

【形状・構造及び原理等】

〈形状〉

- ・ 本製品の各形状は以下のとおり。


ライノウォッシュ本体



アウタージャケット



ライノベンチュリー

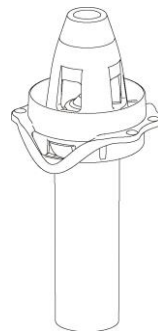

〈作動原理〉

- ・ コンプレッサーにより発生した圧縮空気が、ノズルから吐出されるときノズル部と吸水管の間に生じる負圧作用によって、薬液が上部へ吸い上げられ、上部のパッフルに衝突し、細かい霧となって外部に噴出する。

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

- ・ 生理食塩水又は薬液等の洗浄液を鼻腔から注入し、鼻腔内を洗浄する目的で使用する器具である。

【使用方法等】

〈使用方法〉

- ① ライノベンチュリーを本体に差し込み、生理食塩水や薬液を入れます。
- ② ライノウォッシュ本体にアウタージャケットを接続します。
- ③ チューブの端を組み立てたライノウォッシュ本体のチューブ接続口に差し込み、もう一端をエアーコンプレッサーの空気吐出口に接続します。
- ④ エアーコンプレッサーの電源を入れモーターを作動させます。
- ⑤ ライノウォッシュを上向きにして片方の鼻腔にあて、噴霧ボタンを押します。

〈使用後〉

- ① 鼻洗浄が終了したらエアーコンプレッサーの電源を切ります。
- ② ライノウォッシュ本体からチューブを外し、残液や粘液を捨てます。
- ③ 各部品を分解し洗浄後、十分に自然乾燥させてから清潔に保管します。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・ エアーコンプレッサー等器械本体は、使用前に必ず点検を行うこと。
点検や取扱い方法に関しては各機器の添付文書及び取扱説明書を参照すること。
- ・ ライノウォッシュ本体等の各部品は、ひび割れや亀裂等の損傷がないか
使用前に必ず点検を行うこと。
ライノベンチュリーのノズル部に目詰まりがないかも確認すること。
異常が見られたら使用せずに新しいものと交換すること。
- ・ 使用後はすみやかに各部品を洗浄すること。
- ・ 鼻腔や咽頭に炎症がある場合には、鼻洗浄は行わないこと。
- ・ 上を向きながらの鼻洗浄は行わないこと。また、鼻洗浄後に強く鼻をかまないこと。中耳炎を起こしてしまうおそれがあります。
- ・ 鼻洗浄には生理食塩水又は同等の浸透圧の薬液を使用すること。
水道水をそのまま用いての洗浄は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

[保管条件]

- ・ 温度 : -25～+50℃
- ・ 湿度 : 30～95%
- ・ 気圧 : 700～1060hPa

[耐用期間]

- ・ ライノウォッシュ本体 … 6ヶ月
- ・ アウタージャケット … 6ヶ月
- ・ ライノベンチュリー … 6ヶ月

※[上記耐用期間は自己認証データによる。]

【保守・点検に係る事項】

- ・ 必ず使用前後の点検を行い、異常が認められた時は新しいものに交換するか、販売店もしくは製造販売元に問い合わせてください。
- ・ 使用後は各部品を洗浄・消毒し、十分に自然乾燥させた後、清潔な場所で保管してください。
- ・ 各部品の耐用期間を過ぎての使用はしないでください。
新しい部品と交換する際は、当社指定の純正部品を使用してください。
- ・ 部品の購入等の問い合わせにつきましては、販売店もしくは製造販売元に連絡してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社東京エム・アイ商会

住 所：東京都江東区平野3-2-6

電 話 番 号：03-6458-5588

製造業者：AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l社

国 名：イタリア共和国

取扱説明書を必ずご参照ください。