

機械器具（３１）医療用焼灼器
高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
眼科用レーザー光凝固装置 JMDN コード 70634000

「レーザー光凝固装置 LC-300G」の付属品 レーザー用スリットランプアタッチメント SA-1G

【警告】

レーザー用スリットランプアタッチメントのアームを回避した時はレーザーを照射しないこと。
[レーザー光により目や皮膚に火傷等の障害を受ける恐れがあります]

【形状・構造等】


１．構成

本品は以下のユニットにより構成される。

- （１）本体部
- （２）ファイバ

２．寸法及び質量

寸法：１２０ mm(W) ×
１３０ mm(D) × ２５０ (H)mm
質量：０．７ kg

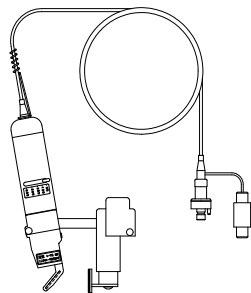

【性能、使用目的、効能又は効果】

１．性能

フォーカス方式：パーフォーカル（同焦点）
照射範囲：φ５０～φ５００μm 連続可変
照準方式：治療レーザーと同軸
安全装置：保護フィルタ
（アタッチメントアームの開閉に連動）

２．使用目的

レーザー光凝固装置 LC-300G 及び細隙灯顕微鏡と組合せレーザーデリバリーに用いる。

【操作方法又は使用方法等】

- １．細隙灯顕微鏡の照明ミラーをレーザー用スリットランプアタッチメント SA-1G に付属する羽子板ミラーと交換します。
- ２．細隙灯顕微鏡に、レーザー用スリットランプアタッチメント SA-1G に付属する付属品マウントを取付けます。
- ３．付属品マウントにレーザー用スリットランプアタッチメント SA-1G を取付けます。
- ４．ファイバのコネクタをレーザー光凝固装置 LC-300G へ取り付けます。

詳細はレーザー光凝固装置 LC-300G の「取扱説明書」を参照のこと。

【作動・動作原理】

レーザー光凝固装置 LC-300G より照射されたレーザー光を光ファイバにより、施術部位へ導びく。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

１．環境条件

温度：１０℃～４０℃
湿度：３０％～７５％（結露なきこと） ＊＊
気圧：７００hPa～１０６０hPa

２．使用期限

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから８年〔自己認証（当社データ）による〕

詳細はレーザー光凝固装置 LC-300G の「取扱説明書」を参照のこと。

【保守点検に係る事項】

- １．本装置および部品は、必ず定期点検を行うこと。
- ２．しばらく使用しなかった装置を再使用するときは、使用前に必ず装置が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

詳細はレーザー光凝固装置 LC-300G の「取扱説明書」を参照のこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 ＊

製造販売業者

株式会社 トプコン
東京都板橋区蓮沼町 ７５番 １号
TEL ０３－３５５８－２５０６

製造業者

株式会社 トプコン