

**2018年1月（第4版 新記載要領に基づく改訂）
 *2005年10月15日（第3版）

承認番号 20400BZZ00567000

機械器具 12 理学診療用器具
 管理医療機器 手持型体外式超音波診断用プローブ JMDN 40768000

特定保守管理医療機器 メカニカルセクタスキャナ SMA-736SA

** 【禁忌・禁止】

<適用対象>

次の部位には使用しないこと。

- ・眼球への適用

〔眼球への適用を意図して設計されていない〕

<併用医療機器>

除細動器との併用は行わないこと。

<相互作用>の項参照。


** 【形状・構造及び原理等】

1. 構成

- ・スキャナ本体
- ・収納ケース（キャリングケース）

詳細はプローブ付属の取扱説明書 2B735-051 の〔構成〕をお読みください。

2. 各部の名称

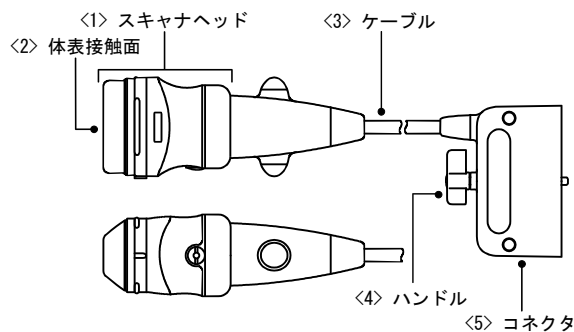

患者に接触する部分とその原材料

- <1> スキャナヘッド：変性ポリフェニレンオキササイド樹脂
- <2> 体表接触面：シリコンゴム

3. 機器の分類

- ・電撃に対する保護の形式による分類
：クラスⅠ機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類
：BF形装着部を持つ機器
- ・水または粒子状汚染物質の有害な浸入に対する保護の程度による分類
：IPX7（コネクタ部を除く）

4. 本体寸法および質量

- (1) 寸法（単位：mm）
 ヘッド、グリップ：79（幅）、60（高さ）、200（奥行）
 ケーブル：3000（長さ）
- (2) 質量：1500 g

5. 作動・動作原理

超音波診断装置に用いて、超音波振動子を順次駆動して超音波ビームを放射し、生体からの反射エコーを受信して、生体の断層像を得るための、超音波プローブです。

** 【使用目的又は効果】

超音波を用いて体内の形状、性状または動態を可視化し、画像情報を診断のために提供する装置に使用するプローブです。

** 【使用方法等】

<使用方法>

このプローブは、超音波診断装置に接続して用います。装置電源を投入し、身体が無損傷の体表上のスキャンしたい部位にプローブをあてることにより、リアルタイムに装置モニタ上に断層像が表示できます。
 穿刺アダプタを組み合わせることができます。

- (1) 穿刺アダプタ（UAGM507A）のアダプタ本体を組み合わせる使用する場合のおもな操作方法を以下に述べます。
 - 1) 感染防止のための保護手袋（洗浄・消毒・滅菌用）を着用する。
 - 2) プローブを洗浄し、消毒する。（または洗浄・消毒されていることを確認する。）
 - 3) アダプタ本体を滅菌する。（または滅菌されていることを確認する。）
 - 4) 保護手袋（洗浄・消毒・滅菌用）を破棄する。
 - 5) 感染防止のための保護手袋（検査用）を着用する。
 - 6) 電源投入前の始業点検を実施する。
 - 7) プローブを超音波画像診断装置に接続する。
 - 8) 超音波画像診断装置の電源を入れる。
 - 9) 電源投入後の始業点検を実施する。
 - 10) プローブに安全性の確認された滅菌済みの超音波ゲルを塗布する。
 - 11) プローブに安全性の確認された滅菌済みのプローブシースを装着する。
 - 12) プローブにアダプタ本体を装着する。
 - 13) プローブを無損傷の体表上の穿刺したい部位にあて、超音波画像を確認する。
 - 14) 超音波画像診断装置でモードおよび周波数を切り替えて最適な画像に調整する。
 - 15) 超音波画像診断装置を操作して、画面にニードルマークを表示する。
 - 16) 必要な画像を表示し、ニードルマークと穿刺針の画像を確認しながら穿刺を行う。
 - 17) 穿刺針をアダプタ本体から外す。
 - 18) 超音波画像診断装置の電源を切る。
 - 19) プローブからアダプタ本体、プローブシースを取り外す。
 - 20) プローブシースを感染性廃棄物として廃却処分する。
 - 21) プローブに残っている超音波ゲルを拭き取る。
 - 22) プローブを超音波画像診断装置から取り外す。
 - 23) プローブおよびアダプタ本体を洗浄、消毒し、乾燥させる。
 - 24) アダプタ本体を滅菌する。
 - 25) 終業点検を実施する。
- (2) 穿刺アダプタ（UAGM507A）のアダプタ本体と水袋を組み合わせる使用する場合のおもな操作方法を以下に述べます。
 - 1) 感染防止のための保護手袋（洗浄・消毒・滅菌用）を着用する。
 - 2) プローブおよび水袋を洗浄し、消毒する。（または洗浄・消毒されていることを確認する。）
 - 3) アダプタ本体を洗浄・滅菌する。（または洗浄・滅菌されていることを確認する。）
 - 4) 保護手袋（洗浄・消毒・滅菌用）を破棄する。
 - 5) 感染防止のための保護手袋（検査用）を着用する。
 - 6) 電源投入前の始業点検を実施する。
 - 7) プローブを超音波画像診断装置に接続する。
 - 8) 超音波画像診断装置の電源を入れる。

取扱説明書を必ずご参照ください

- 9) 電源投入後の始業点検を実施する。
 - 10) 水袋内に空気が入らないように安全性の確認された滅菌水を注入する。
 - 11) プローブに安全性の確認された滅菌済みの超音波ゲルを塗布する。
 - 12) プローブに水袋を装着する。
 - 13) プローブに安全性の確認された滅菌済みのプローブシースを装着する。
 - 14) 水袋に安全性の確認された滅菌済みの超音波ゲルを塗布する。
 - 15) プローブにアダプタ本体を装着する。
 - 16) プローブを無損傷の体表上の穿刺したい部位にあて、超音波画像を確認する。
 - 17) 超音波画像診断装置でモードおよび周波数を切り替えて最適な画像に調整する。
 - 18) 超音波画像診断装置を操作して、画面にニードルマークを表示する。
 - 19) 必要な画像を表示し、ニードルマークと穿刺針の画像を確認しながら穿刺を行う。
 - 20) 穿刺針を穿刺アダプタから外す。
 - 21) 超音波画像診断装置の電源を切る。
 - 22) プローブからアダプタ本体、水袋およびプローブシースを取り外す。
 - 23) プローブシースを感染性廃棄物として廃却処分する。
 - 24) 水袋に入っている滅菌水を破棄する。
 - 25) プローブを超音波画像診断装置から取り外す。
 - 26) プローブ、アダプタ本体および水袋を洗浄、消毒し、乾燥させる。
 - 27) アダプタ本体を滅菌する。
 - 28) 終業点検を実施する。
- (3) 穿刺アダプタ (UAGM-508A) を組み合わせて使用する場合のおもな操作方法を以下に述べます。
- 1) 感染防止のための保護手袋 (洗浄・消毒・滅菌用) を着用する。
 - 2) プローブを洗浄し、消毒する。(または洗浄・消毒されていることを確認する。)
 - 3) 水袋、アダプタ本体およびニードルガイドを洗浄・滅菌する。(または洗浄・滅菌されていることを確認する。)
 - 4) 保護手袋 (洗浄・消毒・滅菌用) を破棄する。
 - 5) 感染防止のための保護手袋 (検査用) を着用する。
 - 6) 電源投入前の始業点検を実施する。
 - 7) プローブを超音波画像診断装置に接続する。
 - 8) 超音波画像診断装置の電源を入れる。
 - 9) 電源投入後の始業点検を実施する。
 - 10) 水袋内に空気が入らないように安全性の確認された滅菌水を注入する。
 - 11) プローブに安全性の確認された滅菌済みの超音波ゲルを塗布する。
 - 12) プローブに安全性の確認された滅菌済みのプローブシースを装着する。
 - 13) プローブに水袋を装着する。
 - 14) 水袋に安全性の確認された滅菌済みの超音波ゲルを塗布する。
 - 15) 水袋にアダプタ本体およびニードルガイドを装着する。
 - 16) プローブを無損傷の体表上の穿刺したい部位にあて、超音波画像を確認する。
 - 17) 超音波画像診断装置でモードおよび周波数を切り替えて最適な画像に調整する。
 - 18) 超音波画像診断装置を操作して、画面にニードルマークを表示する。
 - 19) 必要な画像を表示し、ニードルマークと穿刺針の画像を確認しながら穿刺を行う。
 - 20) 穿刺針をアダプタ本体から外す。
 - 21) 超音波画像診断装置の電源を切る。
 - 22) プローブから水袋、アダプタ本体、ニードルガイド、プローブシースを取り外す。
 - 23) プローブシースを感染性廃棄物として廃却処分する。
 - 24) プローブおよび水袋に残っている超音波ゲルを拭き取る。

- 25) 水袋に入っている滅菌水を破棄する。
- 26) プローブを超音波画像診断装置から取り外す。
- 27) プローブ、水袋、アダプタ本体およびニードルガイドを洗浄、消毒し、乾燥させる。
- 28) 水袋、アダプタ本体およびニードルガイドを滅菌する。
- 29) 終業点検を実施する。

操作の詳細については、取扱説明書に記載してあります。プローブを使用する前に必ずお読みください。

取扱説明書 2B735-051

穿刺アダプタの使用法および滅菌方法については、穿刺アダプタ (UAGM507A および UAGM-508A) に付属の取扱説明書を参照してください。

<組み合わせて使用可能な機器>

以下の機器に接続することができます。

販売名 : 超音波診断装置 Nemio SSA-550A
 認証番号 : 21200BZZ00788000
 製造販売業者 : パナソニック株式会社
 製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

以下の穿刺アダプタを使用することができます。

販売名 : 穿刺アダプタ UAGM507A
 承認番号 : 22000BZX01375000
 製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

販売名 : 穿刺アダプタ UAGM-508MA
 承認番号 : 22000BZX01377000
 製造販売業者 : キヤノンメディカルシステムズ株式会社

ただし、これらの穿刺アダプタと組み合わせて使用できる超音波診断装置は、超音波診断装置の形式やソフトウェアバージョンで異なります。使用する超音波診断装置の取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

＊ ＊

<重要な基本的注意>

- (1) 感染防止のための保護手袋をしてから使用すること。
- (2) 患者にプローブ以外の部分や安全性の確認されていない他の機器が接触しないようにすること。これらの機器が故障していた場合、患者が感電するおそれがある。
- (3) 低温火傷の可能性があるため、プローブを患者の上に放置しておくなど長時間同じ部位にあて続けられないこと。
- (4) プローブのコネクタを消毒液などの液体に浸漬しないこと。
- (5) 超音波ゲルは水を主成分とするものを使用すること。ヒマシ油などを使用するとプローブが劣化し、感電するおそれがある。また、穿刺時は必要に応じて滅菌された超音波ゲルを使用すること。
- (6) 感染防止のため、プローブのキャリングケースを保管の目的で使用しないこと。
- (7) 穿刺の注意に関しては、穿刺アダプタに付属の添付文書および取扱説明書を参照すること。
- (8) このプローブは防爆型ではないので、装置の近くで可燃性および爆発性の気体を使用しないこと。

<相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関する事) > 併用禁忌 (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
除細動器	除細動器と併用しないこと。 除細動器を使用するときは、プローブを患者から離すこと。	性能の劣化や故障のおそれがある。

取扱説明書を必ずご参照ください

<その他の注意>

この製品を廃棄する場合は産業廃棄物となる。使用後、未滅菌で廃棄した場合、特別管理産業廃棄物となるおそれがある。必ず、地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。
不明な場合は、最寄りのサービスセンタに相談すること。

この他にもこの装置を使用するに当たっての注意事項が取扱説明書に記載してある。使用前に必ず読むこと。

取扱説明書 2B735-051

- ・「安全上の注意」
- ・「使用・管理に関する重要情報」
- ・「保証について」
- ・「免責事項について」

**** 【保管方法及び有効期間等】****<使用条件>**

- ・周囲温度 : 5～35℃
- ・相対湿度 : 30～85%（結露しないこと）
- ・気圧 : 700～1060 hPa

<耐用期間>

指定された保守点検を実施した場合に4年です。
〔自己認証（当社データ）による〕
（ただし耐用期間は使用状態により変化するため、個別に定める場合はこれを優先します。）

**** 【保守・点検に係る事項】****<使用者による保守点検事項>**

点検頻度	点検項目
使用前点検、使用后点検	外観、機能

※使用者による保守点検の詳細については、取扱説明書（2B735-051）の「始業点検・終業点検」の項を確認すること。

**** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】****〔製造販売業者〕**

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
電話番号 0120-503251（コールセンタ）
ホームページ <https://jp.medical.canon>

〔製造業者〕

キヤノンメディカルシステムズ株式会社

〔販売業者（販売店）〕

--