

添付文書

類 別：機械器具(12)理学診療用器具

一般的名称：低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器（JMDNコード：70627000）

分 類：管理医療機器 特定保守管理医療機器

※ ペイントプラー LCF-304H-2

【禁忌・禁止】

以下の人、又は以下の診断を受けた人への使用はやめること。

- ・通電による血管の拡張作用が進行し、血液の増流がみられるため、安静を必要とする患者や出血傾向のある患者、その他出血素因のある患者
 - ・心臓病 ・貧血症 ・高血圧症 ・38℃以上の有熱性疾患
 - ・妊婦及び生理時 ・皮膚疾患及び皮膚過敏症
 - ・法定伝染病及びその他の感染症 ・悪性腫瘍 ・小児の頭部
 - ・治療部位に外傷、湿疹、虫さされ、火傷、かぶれ等の皮膚に炎症のある患者 ・重度の局所循環障害のある患者
 - ・温感の鈍い患者 ・幼児や皮膚の弱い患者
 - ・ペースメーカーやICDなどの電子機器、金属を埋め込んでいる患者
 - ・その他医師が不適と判断した患者
- 胸部付近への通電は避けること。

【形状・構造及び原理等】

1) 機器構成


- ・本体 LCF-304H-2
- ・標準で付属される導子
トッパーパックVSシリーズ（VS-4、VS-6）
マジックベルト

◎オプションの付属品に関しては、別途お尋ねください。


・仕様

出力電流	最大50mA(500Ω抵抗負荷接続時)
出力電圧	最大100V以下(開放時)
出力周波数	1～1000 [Hz]
出力波形	直角交換波(トッパー波)
温熱出力設定	6段階
治療タイマ	1～30 [分](1分刻み)

※ 2) 各部の名称

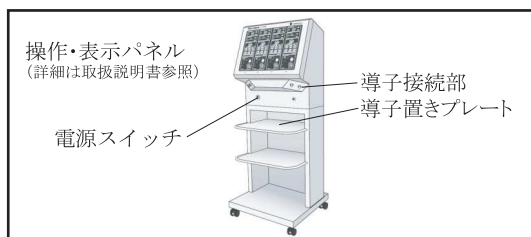

3) ブロック図

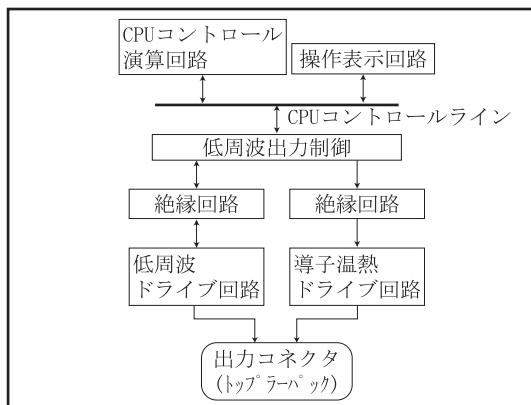

4) 電気的定格

- ①電源 AC単相100V 50/60Hz
- ②電源入力 約320VA

5) 機器の分類

- ①電撃に対する保護の形式による分類 クラスⅠ機器
- ②電撃に対する保護の程度による装着部の分類 BF形装着部

※ 6) 本体寸法及び質量

- ①幅520mm×奥行き470mm×高さ1330mm
- ②本体質量 約40kg

7) 動作原理

本器はAC100Vを動作電源としたCPUコントロール型の治療器である。内部はCPUコントロール演算部、操作表示部、低周波出力部、温熱出力部から構成され、操作表示部からの人的指示によりCPUが各部を適正に制御し治療動作を行う。動作中はCPUが安全監視を行い、治療動作に異常が発生した場合には治療出力を遮断し動作を停止させる。

【使用目的又は効果】

経皮的に鎮痛や筋萎縮改善に用いられる神経及び筋刺激を行うこと及び温熱効果

【使用方法等】

1) 設置場所について、次のような場所は避けること。

- ①水がかかる恐れのある場所。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのある場所。
- ③傾斜・振動・衝撃（運搬時を含む）などがある不安定な場所。
- ④化学薬品の影響やガスの発生のおそれのある場所。
- ⑤超短波治療器、マイクロ波治療器、電気メスなどの強力な電磁波を放出する装置、強力な磁力線を放出する装置、又はX線を放出する装置の近く。

2) 電源設備について

- ①電源はAC100V(3P) コンセントを使用すること。
- ②電源の周波数と電圧及び許容電流値（又は消費電力）に注意すること。
- ③家庭用コンセント（2P）で使用する場合は、必ずアース線を正しく接続すること。

3) 操作方法について

操作方法の詳細については、取扱説明書の操作方法の項を参照すること。

<準備>

- ①導子を本体に接続する。
- ②湿布帯及びバックカバーを適切に濡らし、導子に取り付ける。
- ③本体の電源を入れる。

<操作手順>

- ④治療時間、温熱出力を設定し、導子を患部に装着する。
- ⑤治療部位及び治療プログラムを選択し、出力ボリュームを上げる。

<終了>

- ⑥治療時間が終了し、「○番の治療が終了しました」のアナウンスが流れたら、患部より導子をはずす。
- ⑦治療時間の途中で、治療を中止したい時は、ストップボタンを押す。
- ⑧診療時間の終了の際は、電源スイッチをOFFにする。
- ⑨使用した湿布帯及びバックカバーは、導子より外し洗濯する。

【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意
- ① 機器本体や導子等を分解して内部の部品に手を触れたりしないこと。また、改造等は大変危険な行為であるのでしないこと。
 - ② 故障の時は電源を切り、「故障・使用不可」等の適切な表示を行い、取扱店またはメーカーの修理が完了するまで、機器に触れないこと。
 - ③ 機器のアースを接続する場合、火災の危険があるのでガス管には絶対に接続しないこと。
- 2) 相互作用
- 他の器械との併用は機器の誤作動の原因となるのでやめること。
- 3) その他の注意
- ① 医師または医療従事者以外の方は、操作しないこと。
 - ② スイッチの接触状態・各種設定・メーター表示類等の点検を行い、機器が正常に作動することを確認してから使用すること。
 - ③ すべてのコードの接続が正確でかつ完全であることを確認してから使用すること。
 - ④ 患者に直接接続する導子等に異常がないか点検してから使用すること。
 - ⑤ 診断、治療に必要な時間・量(電流・温熱)を超えないよう注意すること。
 - ⑥ 機器の作動状態や患者の異常に対して常に注意すること。
 - ⑦ 機器及び患者に異常が発見された場合は、患者に安全な状態でただちに機器の作動を停止させ、適切な処置を行うこと。
 - ⑧ 患者が機器のスイッチやツマミ等に触れないよう注意すること。
 - ⑨ コード類の取り外しに際してはコードを持って引き抜くなどの無理な力をかけないこと。
 - ⑩ 使用後の湿布帯及びパックカバーは必ず洗濯し、清潔に保つこと。
 - ⑪ 湿布帯及びパックカバー等の消耗品に劣化が見られる時は、早めに交換すること。
 - ⑫ 湿布帯及びパックカバーの濡らし方(濡れ具合)が適切であることを確認してから治療を行うこと。
 - ⑬ 導子、湿布帯をはじめとする付属品類は、専用のもの(弊社純正品)を使用すること。
 - ⑭ オプションの導子を使用する際は必ず使用上の注意について説明を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 機器、導子等の使用後は、清浄に保管すること。
- 2) 構成品である導子等は、一部消耗品的要素があるため、破損状態等を見極め、定期的に交換すること。
- 3) 保管場所について、次のような場所は避けること。
 - ① 水がかかる恐れのある場所。
 - ② 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのある場所。
 - ③ 傾斜・振動・衝撃(運搬時を含む)などがある不安定な場所。
 - ④ 化学薬品の影響やガスの発生の恐れのある場所。
 - ⑤ 電磁波が発生するマイクロ波治療器からの直接照射を受けたり、磁気の影響を受ける場所。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

点検項目	点検頻度	点検内容(概要)
日常点検	使用前	・電源ケーブルの接続 ・導子の損傷 ・消耗品(湿布帯・パックカバー等)の劣化の確認及び交換 ・一連の動作及び表示
	1ヶ月以上使用しなかった場合の追加事項	・異音、異常振動 ・導子接続部の緩み
定期点検	1年に1回	・電源入力 の測定 ・接地漏れ電流の測定 ・患者漏れ電流の測定 ・絶縁抵抗の測定 ・出力ゼロスタート機能のチェック ・出力電流及び出力電圧の測定 ・周波数の測定 ・タイマー機能のチェック ・外装のキズ、パネル及び銘板の表示 ・ツマミ、スイッチの操作性 ・電源ケーブル、プラグの状態 ・付属品の状態

管理者が日常点検と定期点検を行うこと。
詳細な内容は、機器付属の定期点検マニュアルを参照すること。

2. 業者による保守点検事項

点検頻度	点検内容(概要)
1年に1回	・電源入力 の測定 ・接地漏れ電流の測定 ・患者漏れ電流の測定 ・絶縁抵抗の測定 ・出力ゼロスタート機能のチェック ・出力電流及び出力電圧の測定 ・周波数の測定 ・タイマー機能のチェック ・外装のキズ、パネル及び銘板の表示 ・ツマミ、スイッチの操作性 ・電源ケーブル、プラグの状態 ・付属品、消耗品の状態 ・ヒューズの状態 ・電気配線等の状態 ・各部ネジ等の状態

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞
セルコム株式会社
福岡県福岡市東区多の津1-4-6 / TEL 092-612-7101
＜製造業者＞
セルコム株式会社
福岡県福岡市東区多の津1-4-6 / TEL 092-612-7101