


類別名称：器具機械 6 8 印象採得用又は咬合採得用器具
一般医療機器 一般的名称：歯科印象材用シリンジ JMDNコード：35860000

販売名：アガロイドシリンジ

【形状・構造及び原理等】

形状

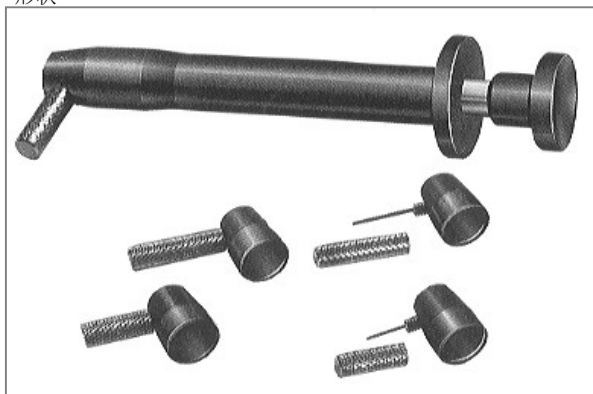

品種	針部太さ	針部長さ
細口 L	1.0 mm	16 mm
細口 M	1.0 mm	10 mm
中口 L	1.2 mm	16 mm
中口 M	1.2 mm	10 mm

材質：黒色部-耐熱性デルリン樹脂 金属部-ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

寒天印象材の注入に用いる器具。

【使用方法等】

- (1) 使用する前に必ず洗浄すること。
- (2) 装填
 - ① シリンジヘッド（頭部）を外して寒天印象材スティック（アガロイド）を挿入し、軽く頭部を装着した後、シリンジブランジャーを前にいっぱい押し、中の空気を出してからしっかり閉めます。※空気が残っていると水が入り、危険です。
 - ② 寒天印象材用コンディショナーを 100℃にセットし、シリンジを挿入し約 10 分間保留、溶解させます。
 - ③ その後、コンディショナー貯蔵槽の温度を 60℃に下げて保留し、準備が完了します。
- (3) 印象
 - ① 印象に際しては、予めアルギン酸塩印象材を練和、トレーに盛った後、コンディショナーよりアガロイドを取り出し、手早く窩洞や歯頸部に注入します。
 - ② アガロイドが硬化しないうちに用意したアルギン酸塩印象材で連動印象を行います。
 - ③ 印象後は水洗いの後、なるべく早く石膏を注入します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① 印象採得の前に、必ず口腔外でシリンジのブランジャーを押し、シリンジ内に空気や水が残留していないことを確認すること。
- ② 本品は、加熱使用するため、使用の際、火傷をしないよう、患者に火傷をさせないように注意すること。

【使用上の注意】

- (1) 注意事項の厳守
器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
- (2) 本品を加熱使用の際は、火傷の恐れがあるので、口腔粘膜や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。
付着した場合には、すぐに大量の水で洗浄し、専門医の診断を受けさせること。
- (3) ステンレス鋼使用
素材のステンレス鋼は、鉄に比較して錆びにくい金属である

が、使用方法、環境によっては腐食することがある。

- (4) 二次加工の禁止
折損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻（刻印）等の改造を絶対に行わないこと。
- (5) 家庭用洗剤の禁止
金属を腐食させることがあるため、家庭用洗剤を使用しないこと。洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- (6) 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は金属を腐食させることがあるため、使用しないこと。
- (7) 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ① 次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるため、使用しないこと。（次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン）
 - ② 薬液消毒を行う場合は、薬剤の添付文書に記載の使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - ③ 使用後は防錆洗浄液、精製水を用いて付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ④ 洗浄、消毒、滅菌には、出来る限り精製水を用いること。
水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
 - ⑤ 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は器具を変質、変色させることがある。
 - ⑥ 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- (8) 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止
腐食の原因となるため洗浄の際、磨き粉、金属ウール、金ブラシ等を使用しないこと。
- (9) 保管上の注意
「もらいさび」を防ぐため、腐食のある器具と一緒に保管しないこと。又、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
- (10) 取扱いについて
器具の寿命を著しく低下させるため粗雑な取扱いは避けること。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

- ・使用前・使用後に、摘み部分に破損、ヒビ、キズがないか、又、作業部・柄部に大きなキズや腐食がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。
- ・使用後の機器は感染症伝播防止の為、消毒滅菌を措置を施し、再使用すること。

〇包装

- (1) アガロイドシリンジ
 - ① アガロイドシリンジ 細口 L 1 本/函
 - ② アガロイドシリンジ 細口 M 1 本/函
 - ③ アガロイドシリンジ 中口 L 1 本/函
 - ④ アガロイドシリンジ 中口 M 1 本/函
- (2) アガロイドシリンジ ヘッド（交換用ノズル）
 - ① アガロイドシリンジ ヘッド 細口 L 1 個/函
 - ② アガロイドシリンジ ヘッド 細口 M 1 個/函
 - ③ アガロイドシリンジ ヘッド 中口 L 1 個/函
 - ④ アガロイドシリンジ ヘッド 中口 M 1 個/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋 4-25-12
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859