


類別名称：器具器械 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 一般的名称：歯科用圧入充填器 JMDNコード：70681000

販売名：オブチュレーションインジェクター

【形状・構造及び原理等】

形状

①オブチュレーションインジェクター

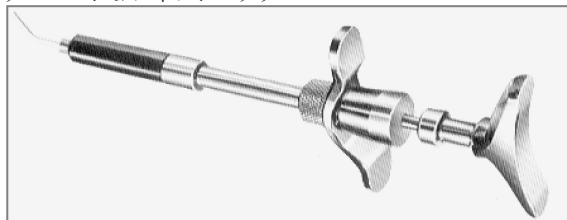

材質：本体-真鍮、メッキ プロテクター-ベークライト

②オブチュレーションインジェクター口針



サイズ	L	M	S1	S2	S3	S4
先端	1.5	1.2	1.1	1.0	0.9	0.7mm
外径						

材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用直接金充填材、歯肉圧排糸、歯科用歯周保護材料等を圧入充填するために用いる器具。根管充填材オブチュレーションガッターを注入するために用いる専用注入器

【使用方法等】

- (1) 使用する前に必ず洗浄すること。
- (2) ガッター消毒後、インジェクターからブランジャーを引き抜き、ガッターを挿入します。
※本材が長すぎる場合には適量を折って装填して下さい。
- (3) オブチュレーションインジェクターをオブチュレーションヒーターあるいは、火焰、温水で加熱します。
- (4) 加熱後、インジェクターを根管口部へ移動し、ブランジャーをゆっくり押しながら、本材を根管内へ注入します。

〔オブチュレーションインジェクター口針の取付方法〕*

- (1) 口針を取り付ける際は、Oリングが口針内出口穴部を中心に正確に設置されていることを確認し、インジェクター本体のネジ部にゆっくり回しながらねじ込みます。

※ねじ込み中、抵抗を感じた時点で止めます。必要以上にネジ込むと内部のOリングをつぶし、出口穴を塞いでしまうため、ブランジャーを押せなくなったり、ネジ込み部からガッターが漏れるおそれがあります。

- (2) 口針内を清掃したい場合には、弊社ユーカリソフトをダッペングラス等の容器に移し、口針を数分間浸漬した後、ファイルなどにより、ノズル内部のガッターを除去し、Oリングを再度設置します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- (1) オブチュレーションインジェクター（注入器）で本材を注入する際は、エアによる射出を予防するため、必ず口腔外で押し出しテストを行うこと。
- (2) オブチュレーションインジェクター注入時は患者に火傷をさせないよう必ずオブチュレーションプロテクターを口針側にスライドさせて使用すること。

- (3) 本材は、加熱使用するため、使用の際、火傷をしないよう、また、患者に火傷をさせないよう注意すること。
- (4) 誤飲防止の為ラバーダムシートを使用すること。

【使用上の注意】

- (1) 本品を加熱使用の際は、火傷の恐れがあるので、口腔粘膜や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合には、すぐに大量の水で洗浄し、専門医の診断を受けさせること。
- (2) 本品は尖頭器具のため、患者及び周囲の環境に損傷を与えぬよう注意して使用すること。
- (3) 二次加工の禁止
折損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻（刻印）等の改造を絶対に行わないこと。
- (4) 家庭用洗剤の禁止
金属を腐食させることがあるため、家庭用洗剤を使用しないこと。洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- (5) 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ①薬液消毒を行う場合は、薬剤の添付文書に記載の使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - ②使用後は防錆洗浄液、精製水を用いて付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ③加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は器具を変質、変色させることがある。
- (6) 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止
腐食の原因となるため洗浄の際、磨き粉、金属ウール、金ブラシ等を使用しないこと。
- (7) 保管上の注意
「もらいさび」を防ぐため、腐食のある器具と一緒に保管しないこと。又、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

- ・使用前・使用後に、ノズル接合部にゆるみ、脱落がないか、又、作業部・柄部に大きなキズや腐食がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- ・使用後の機器は感染症伝播防止の為、消毒滅菌等の措置を施し、再使用すること。

包装

- (1) オブチュレーションインジェクター単品販売品
 - ・オブチュレーションインジェクター 1本/函
(口針L、M、S1、S2各1本計4本添付)
- (2) オブチュレーションインジェクター口針（交換用口針）
 - ①一般用混 L、M、S1、S2各1本計4本/袋
 - ②小児用混 S3、S4各2本計4本/袋
 - ③L単品 4本入/袋
 - ④M単品 4本入/袋
 - ⑤S1単品 4本入/袋
 - ⑥S2単品 4本入/袋
 - ⑦S3単品 4本入/袋
 - ⑧S4単品 4本入/袋

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋4-25-12
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859

取扱説明書等を必ずご参照ください。