

類別名称：器具機械 6 8 印象採得用又は咬合採得用器具

一般医療機器 一般的名称：歯科印象採得用トレー JMDNコード：16350000

販売名：東洋ブリタニアトレー

【形状・構造及び原理等】



形状 裏面参照

材質：スズを主成分とする軟質合金

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具。各種歯科用印象材により印象採得を行う際に用いる器具。

【使用方法等】

- (1) 使用する前に必ず洗浄すること。
- (2) 顎堤の形態に合わせて、最適なトレーを選択します。
- (3) 必要に応じて適度に曲げたり、金冠バサミで切ります。辺縁部はゴム製研磨材等を用いて、丸めて仕上げます。冬期など硬い場合にはお湯で温めると若干柔らかくなります。
- (4) 各種印象材をし、スパチュラーを用いて素早く、トレー上に盛りつけ、平らに馴染めます。
- (5) 辺縁部にはユーティリティワックスを用いて補足します。
- (6) 口腔内に運び、印象採得します。

【使用上の注意】

- (1) 注意事項の厳守
器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。
- (2) 家庭用洗剤の禁止
金属を腐食させることがあるため、家庭用洗剤を使用しないこと。洗浄には歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- (3) 機能水の使用禁止
超酸化水（超酸性水）等は金属を腐食させることがあるため、使用しないこと。
- (4) 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ① 次の薬剤は金属腐食を起こす恐れがあるため、使用しないこと。
（亜硝酸ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン）
 - ② 薬液消毒を行う場合は、薬剤の添付文書に記載の使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては金属素材に影響を及ぼすことがある。
 - ③ 使用後は洗浄液、精製水を用いて付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ④ 洗浄、消毒、滅菌には、出来る限り精製水を用いること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
 - ⑤ 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は器具を変質、変色させることがある。
 - ⑥ 洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- (5) 磨き粉、金属ウール、金ブラシの使用禁止 腐食の原因となるため洗浄の際、磨き粉、金属ウール、金ブラシ等を使用しないこと。

- (6) 保管上の注意 「もらいさび」を防ぐため、腐食のある器具と一緒に保管しないこと。又、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。
- (7) 取扱いについて 器具の寿命を著しく低下させるため粗雑な取扱いは避けること。

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕


- ・使用前・使用後に、作業部・柄部にキズや腐食がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- ・使用後の機器は感染症伝播防止の為、消毒滅菌を措置を施し、再使用すること。

包装

1 個/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社 東洋化学研究所
製造元：同
住所：〒173-0004 東京都板橋区板橋 4-2-5-12
電話番号：03-3962-8811
ファックス：03-3961-1859

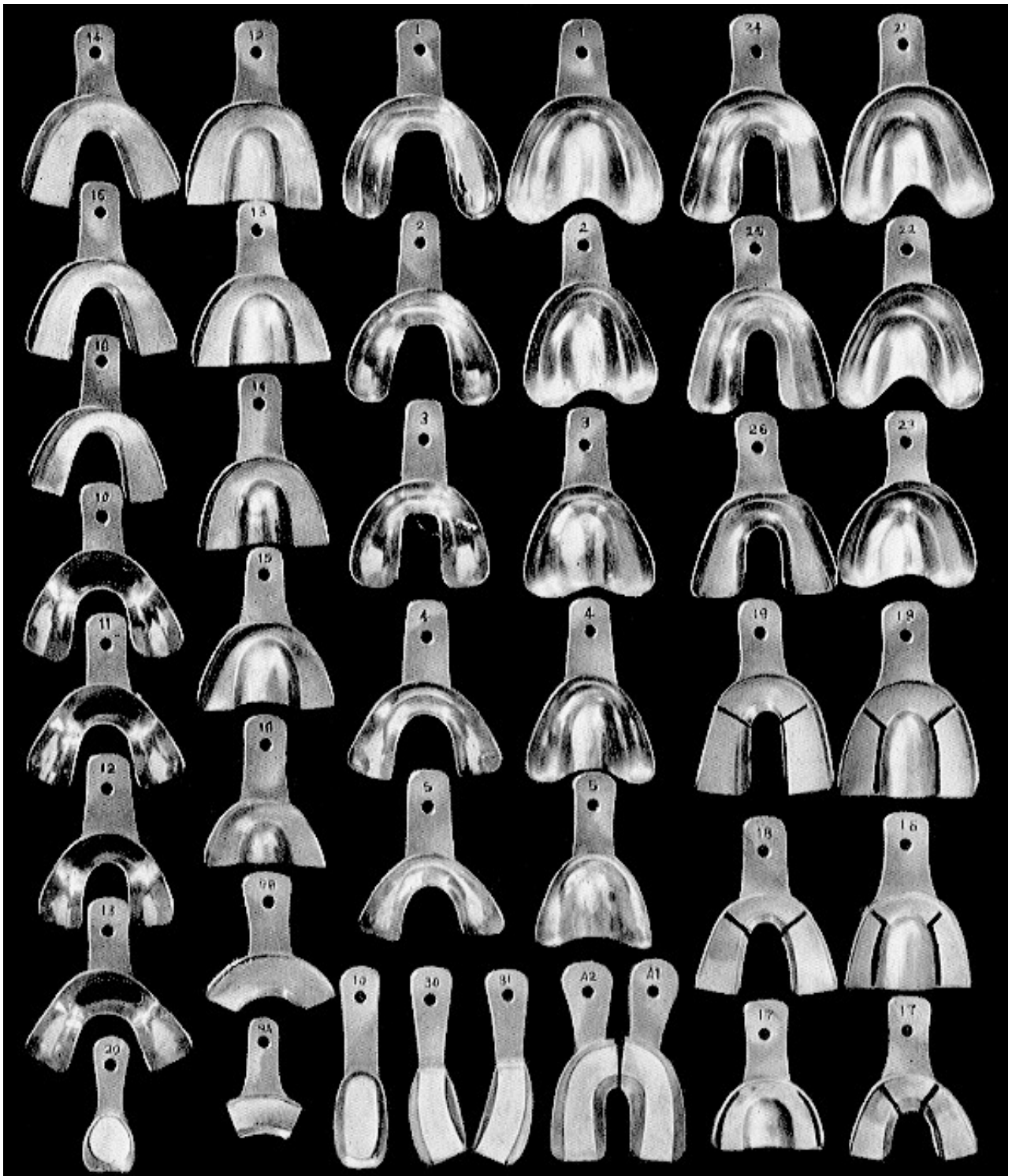

東洋ブリタニア・トレー（穴無し）

		大	中	小		
石膏用	上顎	21	22	23	—	—
	下顎	24	25	26	—	—
無歯用	上顎	1上	2上	3上	4上	5上
	下顎	1下	2下	3下	4下	5下
有歯用	上顎	12上	13上	14上	15上	16上
	下顎	14下	15下	16下	—	—
	上顎	19	18	17	—	—
	下顎	19	18	17	—	—
残歯用		10	11	12	13	

局部用	10, 20, 30, 31, A1, A2, 9A, 9B
-----	--------------------------------

アルギン用トレー（ブリタニア・トレーに穴明）

全顎用

上顎	L1 (21上)	M1 (22上)	S1 (23上)
下顎	L2 (24下)	M2 (25下)	S2 (26下)

局部用

P1 (30)	P2 (31)	P3 (9B)
---------	---------	---------