


ワイヤレス視力表照明装置 HE-61L

【形状、構造及び原理等】

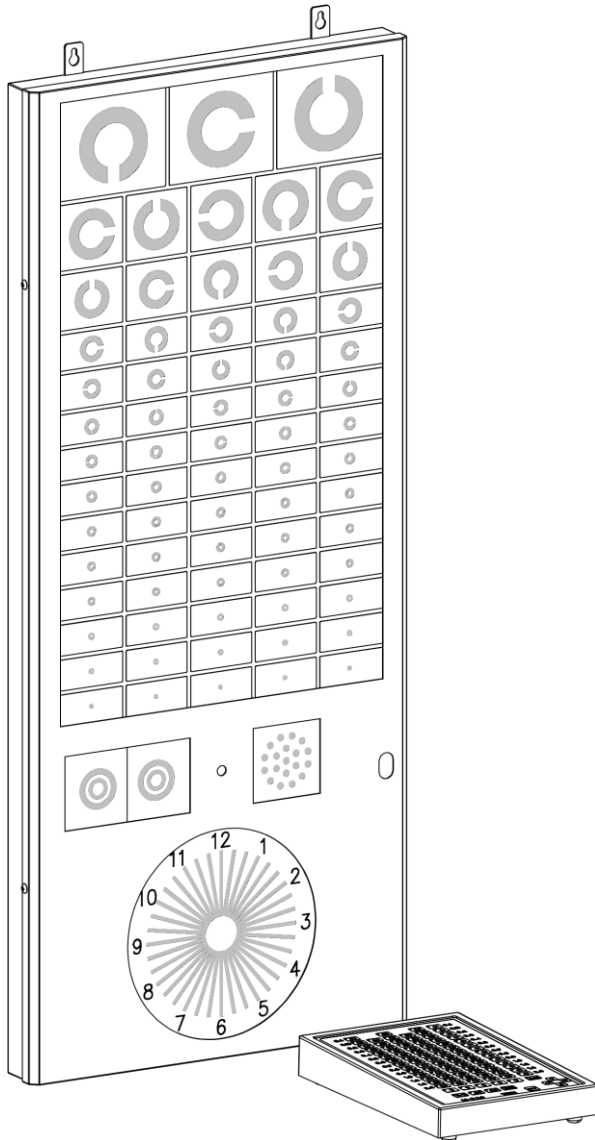

1. 構成

- ・本体 1
- ・リモコン（単3乾電池2本付） 1
- ・電源コード（アース線付き変換プラグ付属） 1
- ・予備用ヒューズ(T1AL250V) 2
- ・取扱説明書 1

オプション 架台, リモコン台

2. 電氣的定格

電源：本体部 AC100V 50/60Hz 10VA
リモコン部 DC3V（単3アルカリ乾電池2本）1mW

3. 機器の分類

電撃に対する保護の形式 クラスⅠ（本体）
内部電源機器（リモコン）

4. 寸法及び質量

外形寸法	本体	420mm(W)×995mm(H)×50mm(D)
	リモコン	178mm(W)×285mm(H)×40mm(D)
質量	本体	11kg
	リモコン	1.5kg

5. 使用環境条件

温度範囲	+10℃～+35℃
湿度範囲	30%～75%
気圧範囲	700hPa～1060hPa

6. 動作原理

あらかじめ印刷されている視標板の内側に、個々の視標単位で照明が準備されており、照明を点灯させたい視標をリモコン部から検者が指定すると、対応した本体の視標照明が点灯する。検者は点灯している視標が判明するか被検者に解答させることで、被検者の視力値を知ることができる。

【使用目的又は効果】

視力検査に用いる視力表として使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法

- (1) 電源プラグをアース付きACコンセントに差し込み、電源スイッチを入れる。電源スイッチが入ると本体の電源表示灯が点灯する。
- (2) リモコンの個別及び、縦1列、横1列、全点灯、上下左右送りスイッチにより、指定された指標ランプの点灯及び縦横移動をする。
- (3) 本体の非常用スイッチにより、視標ランプを点灯させることも出来る。ただし単点灯は出来ない。
- (4) リモコンのOFFキーですべての視標を消灯できる。この場合でも電源表示灯のみ点灯している。
- (5) リモコン操作を3分間行わないと、オートスリープ機能により、すべての視標が消灯する。電源表示灯のみ点灯している。
- (6) すべての視標が消灯した状態（電源表示灯は点灯している）から検査を再開する場合は、使用する視標のキーを押すと対応する視標が点灯する。

【使用上の注意】

1. その他の注意

- (1) リモコンを操作しても表示が変わらない場合は、リモコンの乾電池を交換すること。
- (2) 本器を複数台並べて使用する場合は、リモコンが混信しないように設定が必要になる。設置時には販売業者に設定を依頼すること。

2. 廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄・リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管環境条件

温度範圍	-10℃~+55℃
濕度範圍	10%~95%
氣壓範圍	700hPa~1060hPa

2. 貯蔵・保管

- (1) 気圧・温度・湿度・風通し・日光・ほこり・塩分等を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所、及び水のかからない場所に、納入時の包装状態で保管すること。
- (2) 保管する場合は、リモコンから乾電池を取り外しておくこと。

3. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入された時から10年間（自己認証(当社データ)による）

【保守・点検に係る事項】

- (1) 視標板表面は、常に汚れないように保つこと。汚れた場合は薄めた中性洗剤を湿らせた柔らかい布で、軽く拭き取ること。
- (2) リモコンの乾電池交換では、2本同時に新しい物にすること。また、予備の乾電池を用意しておくこと。
- (3) 視標板の汚れ・損傷の為の交換、あるいは視標の種類を変更したい場合は、販売業者に依頼すること。
- (4) 故障した時は、装置の内部に触れないで、販売業者又は製造販売元に連絡すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 東和
住所 長野県中野市中野1698-2
電話番号 0269-22-5181

[販売業者 (販売店)]

[illegible]

取扱説明書を必ずご参照下さい。