
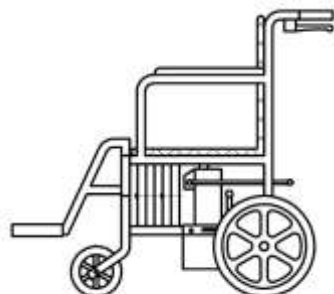


機械器具 〇 １ 手術台及び治療台

一般医療機器 眼科診療・処置用椅子 JMDN15723000

眼科検査用車イス

【形状、構造及び原理等】＊

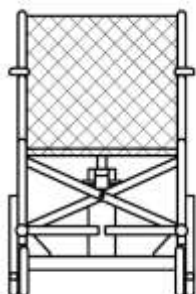

１．構成＊ ＊
本体

２．寸法及び質量

外形寸法 幅550mm × 奥行き900mm × 高さ875mm
質量 28.0kg

３．座面高さ＊ ＊

- １）最低高さ 420mm
- ２）最高高さ 555mm
- ３）上下移動量 135mm

４．許容体重＊ ＊

100kg以下

５．使用環境条件＊ ＊

温度範囲 +10℃～+40℃
湿度範囲 30%～75%（結露無きこと）
気圧範囲 700hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】＊

眼科診療及び検査時に患者が使用する椅子

【使用方法等】＊

１．使用方法

患者を車椅子に座らせた後、車椅子を介助者が所定の場所まで移動させる。ペダル操作によりシートを上下させ適正な高さにしてから診療及び検査を行う。

【使用上の注意】

１．その他の注意＊ ＊

- １）重量物なので移動作業等は、十分注意し危険が無いように行うこと。
- ２）安定した場所で使用すること。
- ３）不安定な場所に放置しないこと。
- ４）本体が汚れたときはカラ拭きを行うこと。汚れのひどい時は、少量の水か中性洗剤を使って拭くこと。有機溶剤は使用しないこと。
- ５）介助者が車椅子から離れるときは必ずブレーキを掛けること。

２．廃棄

廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

【保管方法及び使用期間等】＊

１．保管環境条件

温度範囲 -10℃～+55℃
湿度範囲 10%～95%
気圧範囲 700hPa～1060hPa

２．貯蔵・保管

- １）使用後は綺麗に拭いて、安定した場所に保管すること。
- ２）気圧・温度・湿度・風通し・日光・ほこり・塩分等を含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所、及び水のかからない場所に、納入時の包装状態で保管すること。
- ３）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。

３．耐用期間＊ ＊

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから８年(自己認証(当社データ)による) ＊ ＊

【保守点検に係わる事項】

- １．定期点検を行うこと。
- ２．しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊ ＊

製造販売業者 株式会社 東和
住 所 長野県中野市大字中野 1 6 9 8 - 2
電話番号 0 2 6 9 - 2 2 - 5 1 8 1

[販売業者（販売店）]