

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 注射筒・針用アダプタ（35384000）

OMP オススメコネクタ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、本品のひび割れについて注意すること。〔薬液により本品にひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。〕

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は下図のおすすめコネクタ、ルアーロック付きアダプタ及びキャップからなる。

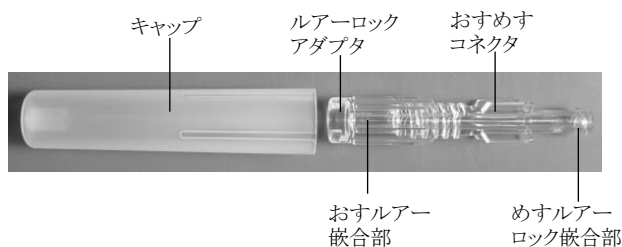

2. 薬液に触れるおすすめコネクタの材質： ポリカーボネート（PC）

3. 原理

本品のめすルアーロック嵌合部が注射筒等と嵌合できるもので、おすすめルアー嵌合部がライン吸引管や接続回路等のめすルアー嵌合部と接続できるもので、またルアーロックアダプタの使用により適度に固定することができるものである。

【使用目的又は効果】

注射筒をチューブ、コック、その他の構造に接続するために使用されるルアーロック付きおすすめアダプタである。

【使用方法等】

- 滅菌袋及び製品に異常がないことを確認後開封し製品を取り出す。
- おすすめコネクタのめすルアーロック嵌合部を注射筒等の先端のおすルアーロック部に取付ける（ねじ込みながら嵌合させる）。
- キャップを引いて取り外す。
- おすすめコネクタのおすルアー嵌合部にライン吸引管等を装着する（嵌合）。
 - 薬液入り注射筒等の場合は本操作が省かれる

- 薬液を注射筒等に吸引された後、ライン吸引管等を取り外す。
 - 薬液入り注射筒等の場合は本操作が省かれる
- 接続回路に付け替えて固定する。（接続回路に固定する際は、ルアーロックアダプタのねじ込みに抵抗を感じてから 90°～180° 締め込むと適度に固定される。）

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- おすすめルアー嵌合部に接続回路のエクステンションチューブ等を接続する際は、ルアーロックアダプタを強くねじ込み過ぎないように注意すること。（ねじ込み抵抗を感じてから約 90°～180° 締め込むと適度に固定される。）

【使用上の注意】

- 本品を使用する際は、硬質の物で強打しないこと。〔本品を破損する恐れがある。〕
- 本品のおすすめルアー嵌合部は ISO594-1 に準拠しているが、接続相手側が同様の規格に準拠している場合でも絞め方や接続後の取扱い等により、接続が緩むまた過度な締め付けにより破損する可能性がある。
- 使用前又は使用中ひび割れ等の異常が確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

＜使用期限＞

箱のラベル及び滅菌包装の記載に参照（自己認証による）。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元及び製造元：

栃木精工株式会社

〒328-0012 栃木県栃木市平柳町 2 丁目 1 番 5 号

TEL：0282-27-1133

発売元：

株式会社根本杏林堂

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-27-20

TEL：03-3818-3541