

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 チューブ取り外し用ウェッジ（44345000）

キーウェッジ


【禁忌・禁止】

- ポリカーボネート製のため、乳脂肪剤等をはじめ油性成分、界面活性剤又はエタノール等の溶解補助剤を含む薬剤を使用しないこと[本品が破損する恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉

1. 外観形状

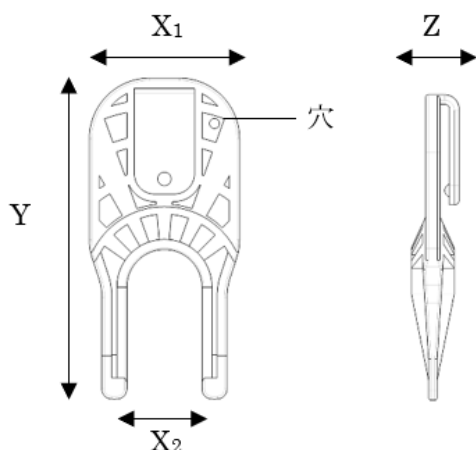

2. 寸法

X₁ : 30mm、Y : 64mm、Z : 9 mm、X₂ : 15mm
重量 : 4.5 g

【使用目的又は効果】

呼吸装置のコネクタを接続端もしくは気管チューブ又は気管切開チューブ等のコネクタから外すために用いる器具である。本品は楔形で先端の中央が開口しており、接続部にゆるく押し当ててふたつのものを引き離すもので、再使用可能である。

【使用方法等】

- 本品の先端を気管チューブ又は気管切開チューブ等のコネクタと呼吸回路等のコネクタとの隙間に差し込む。
- そのまま徐々に押し込み、隙間が広がってきたら、接続が外れるまでさらに押し込む。
- 注意してコネクタを取り外す。
- クリップで衣服等につけることができる。また、ハンドルの穴に紐等を通して、クリップを付けられない場所でも引っ掛けることができる。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- 使用前に、本品に傷や汚れがなく、清浄な状態であることを確認してください。汚損されている場合には、使用しないでください。[感染症を発症する可能性があるため。]
- 本品の先端が呼吸回路用等のコネクタと気管切開チューブ等の隙間に入らない場合は使用できない。[無理に差し込もうとしてカニューレ本体が動き、患者に苦痛を与える可能性があるため。]
- てこの原理でこじ開けながら差し込もうとしないこと。[無理にこじ開けようとしてカニューレ本体が動き、患者に苦痛を与える可能性があるため。]

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- JIS T 7201-2-1 に適合する 15mm コネクタが装備されている器具に使用すること。[15mm コネクタ以外には適合しないため] 但し、15mm コネクタに肩がない（又は一部しかない）器具には使用できない。[本品の先端を接続部に押し当てることができないため]
- 本品に薬液は使用しないこと。[本品のひび割れや劣化、クリップが折れる恐れがあるため。]
- クリップを変形させるような力を繰り返し加えないこと。[クリップが折れる恐れがあるため。]

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

直射日光、及び高温多湿（結露なきこと）での長期間の保管を避け、清潔な場所で保管してください。

〈使用期限〉

使用期限はラベルに記載（自己認証（当社データ）による）

【保守・点検に係る事項】

使用前後に本品が清潔であるか都度確認し、適宜洗淨水、必要に応じて微温水と石鹼または中性洗剤で洗淨し乾燥させます。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

栃木精工株式会社

〒328-0012 栃木県栃木市平柳町 2 丁目 1 番 5 号

TEL : 0282-27-1133