

機械器具（56）採血又は輸血用器具
一般医療機器 ルアーアダプタ 35075000

ネオフィード®BSロックⅡ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・本品を「ネオフィード栄養セット EDポンプ用」（認証番号：21300BZZ00176000）、
「ネオフィードENポンプ用セット」（認証番号：226ALBZX00001000）、
「ネオフィード栄養セット」（届出番号：13B1X00085000041）、
「ネオフィードスムーズチューブ」（届出番号：13B1X00085000115）以外と併用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

<構造図(代表図)>

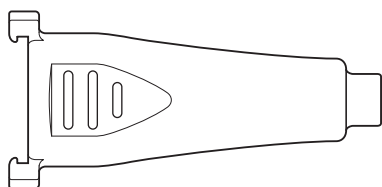

- ・本品は未滅菌品である。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、栄養剤と栄養セットの接続を保持するために使用する器具である。


【使用方法等】

条件：


- ・併用する栄養セットは下記の医療機器であること。

販売名	承認／認証／届出番号
ネオフィード栄養セット EDポンプ用	21300BZZ00176000
ネオフィードENポンプ用セット	226ALBZX00001000
ネオフィード栄養セット	13B1X00085000041
ネオフィードスムーズチューブ	13B1X00085000115


- ・併用する栄養剤のコネクタは下記形状であること。

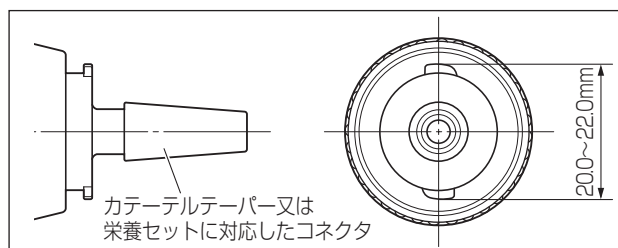

1. 栄養剤のコネクタに接続する栄養セットのコネクタに本品を取り付ける。(図1)

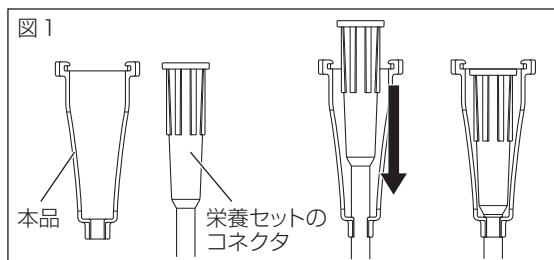

2. 栄養剤のコネクタと栄養セットのコネクタを接続し、本品の爪が栄養剤のコネクタフランジ部に掛かったことを確認する。(図2)

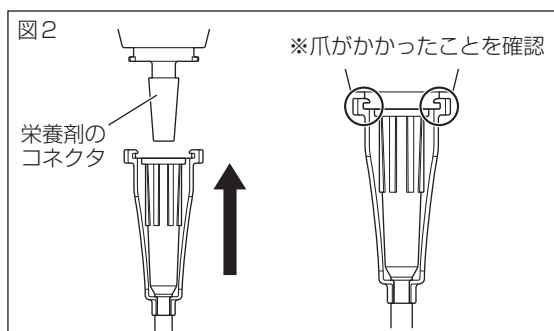

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- ・本品を取り付けたあと、栄養剤と栄養セットの接続が外れないことを確認すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- * ・使用前、接続部に緩みがないことを確認すること。
また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。

* <不具合・有害事象>

1) その他の不具合

汚染、包装の損傷、空気混入、漏れ、外れ

2) その他の有害事象

感染

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
TEL 03-3882-3101

