


機械器具 (55) 医療用洗浄器
一般医療機器 洗浄針 70459000

トップ ラウアージュニードル

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
＜構造図(代表図)＞

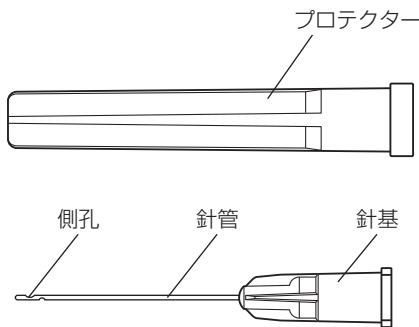

(材質)

針管	ステンレス
針基	ポリプロピレン
プロテクター	ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

・本品は、口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄に用いる。

【使用方法等】

1. 本品を汚染に十分注意しながら包装内より取り出す。
2. 洗浄液を満たしたシリンジを本品にしっかりと取付ける。
3. プロテクターをまっすぐ引き外す。
4. 必要に応じて手で針管を曲げ、形状付けを行う。
5. 針管を目的の部位に挿入する。
6. 洗浄液を噴射し、洗浄を行う。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 1) プロテクターを外す場合には、針先がプロテクターに接触しないように注意すること。
- 2) 針管には直接手を触れないように注意すること。[感染のおそれがある。]
- 3) 接続部を汚染しないように注意すること。
- 4) 何等かの原因により曲がった針管や、曲がった針管を戻して使用しないこと。[針管が折れて体内に残留するおそれがある。]
- 5) 針管を針基の付け根や側孔部で折り曲げないこと。また、針管の反復折り曲げを行わないこと。[針管が折れるおそれがある。]

- 6) 薬品、薬液等の添付文書又は取扱説明書をよく確認して使用すること。[薬品によっては注入抵抗が高く、薬剤を注入できないおそれがある。]
- 7) 次亜塩素酸ソーダ溶液等の薬液の中には、金属を侵す性質を有するものや、結晶化するものがあるので、薬液を入れた状態で放置しないこと。
- 8) 洗浄液の飛び出す方向を確認し、口腔粘膜や皮膚に付着させたり、目に入れないように注意すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 使用前、接続部に緩みがないことを確認すること。
また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること
- 2) 本品の接続に際して、過度の締め付け及び増し締め等には十分注意すること。[接続部が外れなくなったり、破損するおそれがある。]
- 3) 接続部に薬液や血液等が付着すると、接続部に緩み等が生じる場合があるので注意すること。

* ＜不具合・有害事象＞

- 1) その他の不具合
汚染、包装の損傷、空気の混入、漏れ、曲がり、外れ、緩み、穴、折れ、亀裂、切断、詰まり
- 2) その他の有害事象
感染

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による。]

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者 トップ株式会社 (添付文書の請求先)
TEL 03-3882-3101

** 販売業者 デンツプライシロナ株式会社

[お問い合わせ窓口]

デンツプライシロナ株式会社
カスタマーサービス
TEL 0120-789-123



