


機械器具（74）医薬品注入器
一般医療機器 耳鼻咽喉科用薬液噴霧器 70453000

ルネミッシュ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

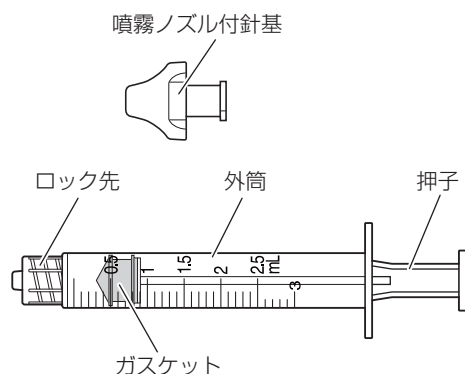

（材質）

噴霧ノズル付針基	ポリプロピレン
外筒、押子	ポリプロピレン
ガスケット	ブタジエンゴム

【使用目的又は効果】

- ・麻酔薬等の医薬品を耳鼻咽喉内部に局所的に噴霧すること。

【使用方法等】

1. 本品を汚染に十分注意しながら包装内より取り出す。
2. 薬液をシリンジに充填、又は吸引し、シリンジ内の気泡を取り除く。
3. 本品とシリンジのロック先をしっかりと接続する。
4. 局部に本品の噴霧ノズル付針基の先端を向け、シリンジの押子を押し、薬液を噴霧する。
5. 噴霧後は、感染・汚染に注意しながら、安全に廃棄する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ・高粘度の麻酔剤は使用しないこと。[噴霧不可や本品の破損等が発生する可能性がある。]
- ・本品に衝撃等を加えないこと。[破損のおそれがある。]
- ・低温下の衝撃で破損するおそれがあるため、冷所保存する際は取り扱いに注意すること。
- ・外筒の目盛を超えて押子を引くと、押子が外筒から外れるおそれがあるので注意すること。
- ・外筒を強く押し潰したり、握ったり、又は押子を斜めに引くと、外筒とガスケットの密着性が低下して液漏れや空気混入するおそれがあるので注意すること。
- ・外筒印刷部を擦ったり、薬液等を付着させると、印刷部が剥離するおそれがあるので注意すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・使用前、構成品同士の接続部に緩みがないことを確認すること。また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れについて、定期的に確認すること。
- ・構成品同士の接続部に薬液や血液等が付着すると、接続部にゆるみ等が生じる場合があるので注意すること。

＜不具合・有害事象＞

- 1) その他の不具合
 - ・鼻腔への挿入過多
- 2) その他の有害事象
 - ・出血

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
TEL 03-3882-3101

販売業者 富士フィルムメディカル株式会社
TEL 03-6419-8045

