


機械器具 (55) 医療用洗浄器  
一般医療機器 洗浄針 70459000

# ニシカルートクリンニードル

再使用禁止

【禁忌・禁止】  
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】  
＜構造図(代表図)＞

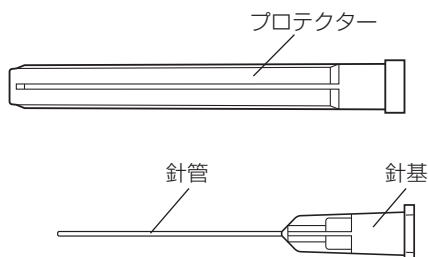

(材質)

|    |         |
|----|---------|
| 針管 | ステンレス   |
| 針基 | ポリプロピレン |

【使用目的又は効果】

口腔、歯髄腔、根管など各部の洗浄や破片の除去及び手術中の異物、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに用いる。


【使用方法等】

※ 本品は、汎用の歯科用シリンジに装着して使用する。

1. 本品を汚染に十分注意しながら包装内より取り出す。
2. 歯科用シリンジを本品にしっかりと取付ける。
3. プロテクターをまっすぐ引き外す。
4. 針管を目的の部位に挿入する。
5. 歯科用シリンジのプランジャを操作し、洗浄液の噴射による洗浄、あるいは異物や汚物並びに洗浄液等を吸引する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

・本品を装着する際は、固定されるまでしっかりねじること。[本品がシリンジにロックされていないと、注入時にはずれる場合がある。]

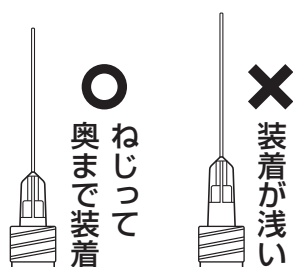

- ・プロテクターを外す場合には、針先がプロテクターに接触しないように注意すること。
- ・針管には直接手を触れないように注意すること。[感染のおそれがある。]
- ・接続部を汚染しないように注意すること。
- ・使用前、接続部に緩みがないことを確認すること。また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ※ 針管を針基の付け根で折り曲げないこと。また、針管の反復折り曲げを行わないこと。[針管が折れる可能性がある。]
- ・本品の接続に際して、過度の締め付け及び増し締め等には十分注意すること。[接続部が外れなくなったり、破損したりするおそれがある。]
- ・薬品、薬液等の添付文書又は取扱説明書をよく確認して使用すること。[薬品によっては注入抵抗が高く、薬剤を注入できないおそれがある。]
- ・次亜塩素酸ソーダ溶液等の薬液の中には、金属を侵す性質を有するものや、結晶化するものがあるので、薬液を入れた状態で放置しないこと。
- ・洗浄液の飛び出す方向を確認し、皮膚に付着させたり、目に入れたりしないように注意すること。
- ・接続部に薬液や血液等が付着すると、接続部に緩み等が生じる場合があるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証 (自社データ) による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ (添付文書の請求先)  
TEL 03-3882-3101

販売業者 日本歯科薬品株式会社  
[お問い合わせ窓口]  
TEL 0120-8020-96  
FAX 083-222-2220

